

大型冷蔵庫・大型フリーザー

検体、培地、試薬、試料の保存など、メディカルからバイオまで、広範囲の分野で利用可能



NR-630F3/NFF-630F3

内容積
約626ℓ

大型冷蔵庫

モデル: NR-630F3

冷却性能: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$

価格 ¥ 650,000

大型フリーザー

モデル: NFF-630F3

冷却性能: $-15^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C}$

価格 ¥ 720,000

- ◆自動霜取り方式を採用、庫内の霜を定期的に除去。
- ◆棚は12mmピッチで移動可能、大小の保存物を各棚で区別・整理、無駄なく収納可能。
- ◆内外装ともに、腐食に強いステンレス製

マイコン制御&デジタル表示



温度制御は、 1°C 単位の温度設定ができるマイコン制御方式を採用。目詰まりをお知らせするフィルター警報ランプや強制霜取りスイッチを採用するなど機能性も充実。

オートクローズ方式扉



扉の閉め忘れをなくす安心のオートクローズ扉。庫内温度の上昇を防ぎます。

シリンダー錠標準装備



保存物の管理に便利な鍵つきです。上下2枚の扉を1個の鍵で施錠します。




日本フリーザー株式会社

URL : <http://www.nihon-freezer.co.jp>

大型冷蔵庫・大型フリーザー仕様

モデル	NR-630F3	NFF-630F3
冷却性能	-5℃～+10℃	-15℃～-20℃
冷却方式	庫内空気強制循環式	
内容積	約626ℓ	
外寸法	W750×D800×H1905mm	
内寸法	W648×D650×H1428mm	
外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
内装	ステンレス鋼板	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
扉	ステンレス鋼板 2枚	
棚	ポリエチレンコーティング網棚3枚	
棚耐荷重	65kg/枚	
圧縮機	レシプロ 180W	レシプロ 450W
冷却器/凝縮器	フィンチューブ/フィンチューブ	
冷媒	R-134a (160g)	R-404A (230g)
除霜方式	ヒータ方式	
電源	AC 100V 50/60Hz 15A	
定格電流	2.5/2.9A	5.0/4.1A
冷却時消費電力	287/332W	424/449W
霜取時消費電力	420/420W	419/419W
温度調節/表示	デジタル設定/デジタル表示	
重量	約115kg	
付属品	スノコ 1枚、排水バット 1個、鍵2本	

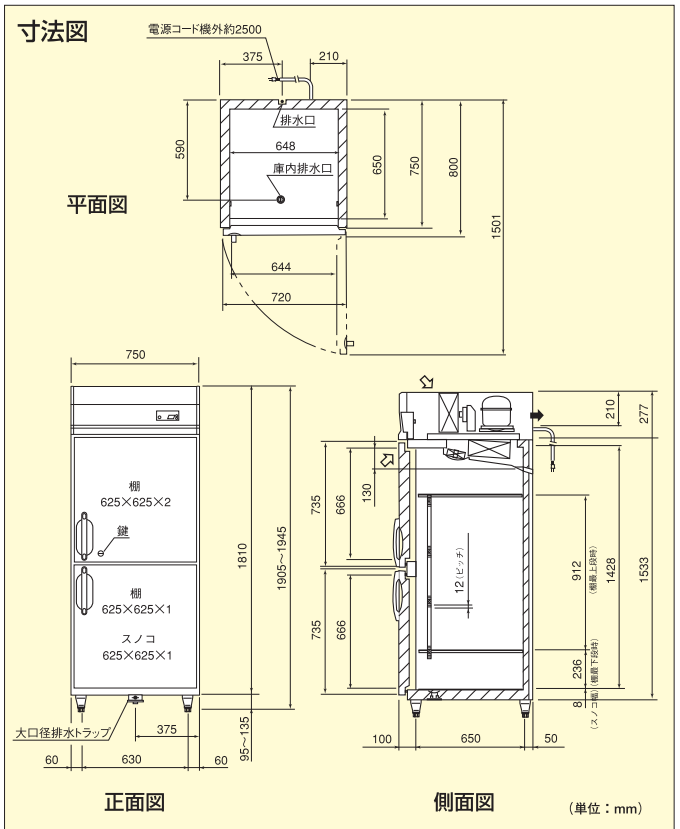

オプション

温度記録計 (SR10000)

- ①大型LED (10×18mm) で鮮明表示、各種設定は簡単な対話式。
- ②防塵防滴前面ドア (IP54 準拠)
- ③警報/ 定刻印字、ゾーン記録、部分圧縮拡大等、各種機能を装備



《主な仕様》・6打点式 (6色ワイヤドット)

- ・外形寸法: W144×H144×D220mm 質量: 2.5kg
- ・センサー:白金測温抵抗体 Pt-100 Ω
- ・記録紙送り速度: 10～1500mm/h (28段階)
- ・有効記録幅: 100mm 記録紙長: 16m (折りたたみ式)
- ・電源電圧: 100～240VAC (周波数切替不要)

本体価格 ¥220,000 (記録紙 1箱付)


記録紙 6箱 1組 ¥15,000

注1: 価格にはセンサー1本が含まれています。追加分についてはお問合せください。


注2: 記録計の取付位置は、製品の向かって左側面になります。

注3: 取付工賃は、別途発生します。

NR-630F3 温度特性

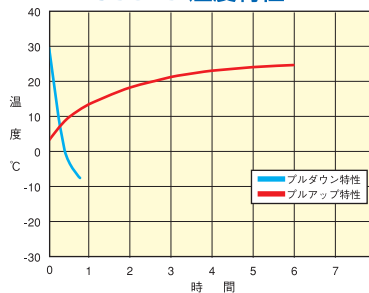

NFF-630F3 温度特性

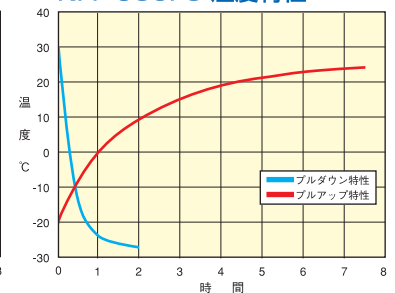

外気温30℃、100V50Hz 無負荷、庫内中央空気温度

注: 製品ごとに若干の個体差があります。

●電源プラグとコンセントの形状

15A-125V 2.5m



保証について 製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、
保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。

⚠️ 安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
- アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。防爆製品以外に保管しますと爆発する危険があります。
- 当製品は保冷用です。急速凍結目的でのご使用は避けてください。

製造発売元



日本フリーザー株式会社

販売店

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL.(03)3831-7643 FAX.(03)3832-0633
 大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2丁目20番2号 TEL.(06)6337-0600 FAX.(06)6369-2166
 茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL.(029)855-1181 FAX.(029)855-0888
 名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市中区西山本通2丁目2番地 TEL.(052)788-7770 FAX.(052)788-7771
 神奈川営業所 〒251-0032 神奈川県藤沢市片瀬375-5 TEL.(0466)29-0701 FAX.(0466)29-0702
 埼玉工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL.(048)933-2755 FAX.(048)936-2228

- 仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
- 梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
- カタログの記載内容は2010年4月現在のものです。