



NIHON FREEZER
地球環境にやさしい

予算申請用

総合カタログ 「2026年版」



ecological, efficient refrigerator global environment protection



保証期間の延長（1年→5年）が選択
できるようになりました。P3参照



日本フリーザー株式会社

URL : <https://www.nihon-freezer.co.jp>

エコロジカルは、日本フリーザーの研究・技術開発の原点です。

1997年12月に採決された気候変動枠組条約は「京都議定書」として、地球環境問題の深刻さを世界中に大きく訴えかけました。フロンはCO₂と並ぶ高い温室効果ガスとして位置づけられ、ますます人々の注意、そして行動を促しています。日本の最先端バイオテクノロジーの進歩に貢献する日本フリーザーは、常に地球環境保護に着眼し、これまでさまざまなエコロジカルな製品づくりにチャレンジしてきました。積極的に取り組んだフロンガス対策では、もっとも高い成果をあげており、オゾン層を全く破壊することのない特殊混合冷媒HFCの数々は、日本フリーザー独自の開発として大きな成功を収めました。また、代替フロンの使用はもちろんのこと、地球温暖化対策に応じたノンフロン冷媒など、低温機器における独自の研究開発力によって、最先端のメディカルからケミカル、さらにバイオの分野まであらゆる細やかなニーズにも対応できるよう、冷媒技術、低温化技術の極める製品づくりに邁進しています。私たちを取り巻く地球環境との共存を目指して、日本フリーザーは技術開発の粋を結集して未来を描きます。

CONTENTS (目次)

製品名	モデル	冷却性能	内容積	使用冷媒種	ノンフロン製品	掲載ページ
フリーズ超低温槽	CLNシリーズ(ダブル冷却)	-75℃~-85℃	324ℓ~781ℓ	HC冷媒	●	6-7
フリーズ超低温槽	CLNシリーズ	-70℃~-80℃	324ℓ~710ℓ	HFC混合	●/—	8
超低温フリーザー	TSXシリーズ	-50℃~-80℃	548ℓ/815ℓ	HC	●	9
マイバイオ	VTシリーズ	-60℃~-80℃	70ℓ/191ℓ	HC混合	●	9
フリーズ超低温槽	CLNシリーズ(-150℃)	-140℃~-150℃	176ℓ/236ℓ	HFC混合	—	10
マイバイオキューブ	DTF-35	-70℃~-80℃	35ℓ	HFC混合	—	10
スーパーフリーザー	SF-53UHC	-40℃~-50℃	530ℓ	HC混合	●	10
	SF-3120HC	-30℃~-40℃	310ℓ	HC	●	10
フリーズ	NFシリーズ	-45℃~-60℃	70ℓ~477ℓ	HC混合	●	11
バイオフィューザー	Dシリーズ	-15℃~-35℃	180ℓ~365ℓ	HC	●	11
バイオフィューザー	GSシリーズ	-14℃~-35℃	104ℓ~573ℓ	HC	●	12
バイオマルチクーラー	KGT-370HC	F:-9℃~-30℃ R:+3℃~+16℃	F:110ℓ R:267ℓ	HC	●	12
ミニキューブ	KX-1021HC	+2℃~+10℃	92ℓ	HC	●	12
	GX-823HC	-14℃~-28℃	69ℓ	HC	●	12
バイオメディカルクーラー	UKSシリーズ	+3℃~+16℃	394ℓ/558ℓ	HC	●	13
バイオショーケース	UKSGシリーズ	+3℃~+16℃	420ℓ/588ℓ	HC	●	13
	LKUV-1613HC	+3℃~+16℃	152ℓ	HC	●	13
保冷库	NDRシリーズ	-7℃~+12℃	485ℓ~1684ℓ	HC	●	14
	NDFシリーズ	-8℃~-25℃	485ℓ~1673ℓ	HC	●	14
	NDFRシリーズ	F:-8℃~-25℃ R:-7℃~+12℃	F:354ℓ~664ℓ R:354ℓ~1111ℓ	HC	●	14
	NDRGシリーズ	+0℃~+10℃	491ℓ~1696ℓ	HC	●	14
薬用冷凍冷蔵庫	NC-ME25S1HC	F:-20℃~-30℃ R:+2℃~+14℃	F:85ℓ R:179ℓ	HC	●	15
薬用冷蔵ショーケース	NCシリーズ	+2℃~+14℃	157ℓ~1239ℓ	HC	●	15
防爆冷蔵庫・防爆冷凍庫	EPシリーズ	+0℃~+10℃	185ℓ/403ℓ	HFC	—	16
	EP-570	-20℃~+10℃	579ℓ	HC混合	●	16
リーベヘル庫内防爆冷凍庫・ 冷蔵庫・冷凍冷蔵庫	LGUEx-1500	-9℃~-26℃	139ℓ	HC	●	17
	LKEXV/SRF-FG	+2℃~+16℃	180ℓ/558ℓ	HC	●	17
	SCF-FG-4002	F:-9℃~-30℃ R:+3℃~+16℃	F:110ℓ R:267ℓ	HC	●	17
ユニット式大型防爆冷蔵庫	EPUTシリーズ	-20℃~+10℃	1028ℓ~3008ℓ	HFC	—	17
クロマトチャンバー	MCシリーズ	+3℃~+26℃	749ℓ~1702ℓ	HFC	—	18
メディカルチャンバー	A-750EC	+3℃~+26℃	749ℓ	HFC	—	18
インキュベーター	NRBシリーズ	-10℃~+50℃	130ℓ~411ℓ	HFC	—	19
プレハブ低温室・恒温室	PF/PR/PEシリーズ	-20℃~+20℃	0.5坪~4.0坪	HFC	—	19
ホシザキ製氷機	IM/FM/CM			HFC	—	20
液体窒素保存容器	GTシリーズ		2ℓ~40ℓ			20
ポータブルフリーザー	SC-DF25K	+10℃~-40℃	25ℓ	ヘリウム	●	21
バイセル(凍結保存容器)						21
バリデーションサービス/集中温度管理システム						22
温度記録計/鍵の取付/その他						23-25

注: R: 冷蔵室、F: 冷凍室

さまざまな要望をカタチにした、 日本フリーザーの高性能製品。

冷却性能、安全性を重視した日本フリーザー独自の新冷却システム

日本フリーザーが独自の技術開発力を結集して誕生した業界初の新冷却システム。

「ワンコンプレッサーシステム」を搭載した -80°C クラスの超低温槽<フリーズ超低温槽・マイバイオ・マイバイオキューブ>は、冷凍機を1台にし、新冷却システムと特殊混合冷媒の開発により、誕生しました。省エネ対策はもちろん、システム構造がシンプルなため故障も軽減できました。また、安全性の高い究極の冷却システムを搭載した「ダブル冷却システム」<フリーズ超低温槽>では、冷凍機2台のどちらかにシステムの異常が起きた場合でも、1台で庫内の温度を超低温(室温が $+30^{\circ}\text{C}$ にて、 -80°C 設定で約 -65°C 以下を維持)に保つことが可能になりました。

「ダブル冷却システム」は、縦型が2020年4月に、横型が2021年1月にノンフロンタイプにリニューアルします。

フリーズ超低温槽 **P.6 - P.8, P.10** マイバイオ **P.9** マイバイオキューブ **P.10**



ノンフロン超低温フリーザー

日本フリーザーは、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社と販売代理店契約を結び、フラグシップモデルであるノンフロン超低温フリーザー(Thermo Scientific™ TSXシリーズ)の2モデル【TSX40086FA(549ℓ)・TSX60086FA(816ℓ)】を販売することになりました。当製品はノンフロン冷媒と新冷却システム「V-Drive制御(状況に応じてコンプレッサーの回転数を制御)」の採用により、環境性・省エネ性に優れた製品となっています。

また、使用電源が「AC100V15A~230V15A」であるため、設置場所での電源確保も容易です。

超低温フリーザー **P.9**



危険性物質の取扱いに着眼し、精度の高い安全性を確保した防爆冷蔵庫

可燃性物質や引火性液体などの危険性物質を扱うために開発された防爆冷蔵庫は、(社)産業安全技術協会の検定に合格した優れた製品です。いまや各研究所、実験室はもちろんのこと、国内の工場、プラントなどで幅広くご利用いただいています。この他、目的や使用に応じた規格品のオーダー製品にも日本フリーザー独自の技術開発力がいかに発揮されています。

防爆冷蔵庫 **P.16**



研究者のパーソナルユースに取り組んだ小型超低温槽&卓上型超低温槽&小型冷蔵庫・冷凍庫

「一人に1台」のニーズにお応えした小型超低温槽&卓上型超低温槽。マイバイオキューブは容量約35ℓ、マイバイオは約70ℓのコンパクトサイズで低価格も魅力です。研究者の理想形であるパーソナルユースを実現した製品で -80°C の優れた冷却性を誇ります。ミニキューブ(小型冷蔵庫・冷凍庫)は実験台の下や研究机の上などの空間スペースを有効活用できます。

マイバイオ **P.9** マイバイオキューブ **P.10** ミニキューブ **P.12**



地球環境保護を見据えたノンフロン製品 「フロン排出抑制法」対象外

2000年2月より販売を開始したノンフロン製品は、オゾン層を全く破壊せず、地球温室効果も極めて小さいノンフロン冷媒を使用しています。2015年4月より施行された「フロン排出抑制法」の対象外製品となるため、簡易点検等の管理義務が発生しません。



フリーズ超低温槽(縦型・ダブル冷却) **P.6** 超低温フリーザー **P.9** マイバイオ **P.9** スーパーフリーザー **P.10**
ノンフロン製品(バイオフィューザー/バイオマルチクーラー/バイオメディカルクーラー/ミニキューブ/フリーズ/バイオショーケース) **P.11-P.13**
保冷库 **P.14** 薬用冷蔵ショーケース **P.15** リーベヘル庫内防爆冷蔵庫・冷凍冷蔵庫 **P.17**





ノンフロン製品の需要は 益々増加しています

フロンガスに関する各種規制

オゾン層の破壊や地球温暖化に影響を与えるフロンガスや二酸化炭素等には以下のような規制があります。

1988年5月 「オゾン層保護法」施行

オゾン層の破壊をもたらすフロンのCFC類は1995年末に生産が全廃、HCFC類は2020年に実質全廃となる。

2005年2月 「京都議定書」発効

地球温暖化の原因とされる温室効果ガス6種（二酸化炭素、フロンガス等）を、先進国全体で5.2%削減することを義務づけ。基準年を1990年とし、目標期間である2008年～2012年に、我が国では6%の削減が義務づけられる。

2002年4月 「フロン回収破壊法」施行 2015年4月 「フロン排出抑制法」施行

フロンガスも二酸化炭素(CO₂)と並び地球温室効果の高いガスと位置づけられ、フロンガス(CFC、HCFC、HFC)を冷媒として使用する業務用冷凍空調機器類を廃棄処分する際には、フロンガスの回収・破壊が義務づけられる。その後、**2015年4月の改正では、フロンガスの漏えいを抑制するために、管理者(ユーザー)に対してフロンガスを含む業務用冷凍空調機器類の点検義務が課せられるようになる。**詳細は環境省HPを参照。

2019年1月 モントリオール議定書の キガリ改正 発効

日本を含む先進国においては、HFCの生産量と消費量について、2011年から2013年までの平均数量等を基準値として、2019年から削減を開始し、**2036年までに85%分を段階的に削減**することが義務付けられました。

当カタログで紹介するノンフロン製品は、このような規制の対象外であるHC冷媒を使用しています。

冷媒の種類	冷媒名	オゾン破壊係数	地球温暖化係数 (GWP)	フロン規制対象 (オゾン層保護法)	フロン排出抑制法対象
特定フロン(CFC)	R-12	1.0	10900	●	●
指定フロン(HCFC)	R-22	0.055	1810	▲	●
代替フロン(HFC)	R-134a	0	1430	—	●
ノンフロン(HC)	R-600a	0	3	—	—
ノンフロン(HC)	R-290	0	3	—	—

注:オゾン破壊係数:R-11を1.0とした時の相対値,地球温暖化係数:二酸化炭素(CO₂)を1とした時の相対値

フロン排出抑制法(改正フロン法)の施行 ※2015年4月～

これに伴い、フロン類を使用したフリーザーや保冷库等を使用されているユーザー様(管理者)に対しては、様々な管理義務が課せられるようになりました。

「管理者(ユーザー)」の役割

フロン類を使用した業務用の冷凍冷蔵機器を使用(管理)するものは、以下の事項が要求される。

①適切な場所への設置等

- ・機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置、設置する環境の維持保全。

②機器の点検

- ・全ての第一種特定製品(フロン類を使用したフリーザー、保冷库等)を対象とした簡易点検の実施。(四半期に一回以上。庫内温度、異音、外観検査等の実施。実施者の制限はなし。管理者レベルで問題なし)

※当社が過去に販売した製品及び現在販売している製品でフロン類を含むものは、この「簡易点検」の義務が発生します。ノンフロン製品は対象外。

- ・一定規模以上(圧縮機定格出力7.5kW以上)の第一種特定製品については、専門知識を有する者による定期点検の実施。

③漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止

④点検等の履歴の保存等(点検・修理内容、冷媒の充填・回収履歴)

⑤算定漏えい量の報告(漏えい量が一定量以上になると国への報告義務発生)



※詳細は、環境省のホームページ等をご参照ください。



通常保証（1年）と5年保証（選択式）について

当社製品は、通常は保証期間は1年（一部製品を除く）となりますが、2026年4月以降の受注分から、保証期間を5年（1年⇒5年）に延長することが選択できるようになりました。対象製品は、当総合カタログに掲載されている以下製品で、標準価格が設定されているものに限り（ユニット式大型防爆冷蔵庫、プレハブ低温・恒温室、製氷機、ポータブルフリーザー、その他特注品、オプション部品、消耗品は除く）。5年保証を選択するとモデル名と標準価格が以下のとおり変更となります（仕様は変更なし）。

パターン	製品本体の通常保証時標準価格	5年保証時の標準価格
A	¥1,500,000以上	通常保証時標準価格+¥150,000
B	¥1,000,000以上 ¥1,500,000未満	通常保証時標準価格+¥100,000
C	¥300,000以上 ¥1,000,000未満	通常保証時標準価格+ ¥50,000
D	¥300,000未満	通常保証時標準価格+ ¥30,000

通常保証と5年保証のモデル名・標準価格一覧

掲載 ページ	通常保証時		5年保証選択時		掲載 ページ	通常保証時		5年保証選択時	
	モデル名	標準価格	モデル名	標準価格		モデル名	標準価格	モデル名	標準価格
P06	CLN-32UWHC	¥1,820,000	CLN-32UWHC-5YW	¥1,970,000	P13	UKSG-420HC	¥420,000	UKSG-420HC-5YW	¥470,000
P06	CLN-52UWHC	¥2,260,000	CLN-52UWHC-5YW	¥2,410,000	P13	UKSG-580HC	¥530,000	UKSG-580HC-5YW	¥580,000
P06	CLN-72UWHC	¥2,700,000	CLN-72UWHC-5YW	¥2,850,000	P13	LKUV-1613HC	¥300,000	LKUV-1613HC-5YW	¥350,000
P06	CLN-35CWHC	¥1,810,000	CLN-35CWHC-5YW	¥1,960,000	P14	NDR-480EHC	¥850,000	NDR-480EHC-5YW	¥900,000
P06	CLN-50CWHC	¥2,180,000	CLN-50CWHC-5YW	¥2,330,000	P14	NDR-630EHC	¥950,000	NDR-630EHC-5YW	¥1,000,000
P06	CLN-70CWHC	¥2,600,000	CLN-70CWHC-5YW	¥2,750,000	P14	NDR-780EHC	¥1,060,000	NDR-780EHC-5YW	¥1,160,000
P07	CLN-32UWHCD1	¥1,820,000	CLN-32UWHCD1-5YW	¥1,970,000	P14	NDR-1080EHC	¥1,130,000	NDR-1080EHC-5YW	¥1,230,000
P07	CLN-32UWHCD2	¥1,880,000	CLN-32UWHCD2-5YW	¥2,030,000	P14	NDR-1380EHC	¥1,260,000	NDR-1380EHC-5YW	¥1,360,000
P07	CLN-52UWHCD1	¥2,260,000	CLN-52UWHCD1-5YW	¥2,410,000	P14	NDR-1670EHC	¥1,390,000	NDR-1670EHC-5YW	¥1,490,000
P07	CLN-52UWHCD2	¥2,320,000	CLN-52UWHCD2-5YW	¥2,470,000	P14	NDF-480EHC	¥930,000	NDF-480EHC-5YW	¥980,000
P08	CLN-32UHC	¥1,440,000	CLN-32UHC-5YW	¥1,540,000	P14	NDF-630EHC	¥1,060,000	NDF-630EHC-5YW	¥1,160,000
P08	CLN-32UHC2	¥1,440,000	CLN-32UHC2-5YW	¥1,540,000	P14	NDF-780EHC	¥1,230,000	NDF-780EHC-5YW	¥1,330,000
P08	CLN-42U	¥1,740,000	CLN-42U-5YW	¥1,890,000	P14	NDF-1070EHC	¥1,360,000	NDF-1070EHC-5YW	¥1,460,000
P08	CLN-52U	¥1,820,000	CLN-52U-5YW	¥1,970,000	P14	NDF-1360EHC	¥1,490,000	NDF-1360EHC-5YW	¥1,590,000
P08	CLN-52UD1	¥1,820,000	CLN-52UD1-5YW	¥1,970,000	P14	NDF-1660EHC	¥1,650,000	NDF-1660EHC-5YW	¥1,800,000
P08	CLN-52UD2	¥1,820,000	CLN-52UD2-5YW	¥1,970,000	P14	NDFR-700EHC	¥1,380,000	NDFR-700EHC-5YW	¥1,480,000
P08	CLN-35CHC	¥1,380,000	CLN-35CHC-5YW	¥1,480,000	P14	NDFR-1020EHC	¥1,410,000	NDFR-1020EHC-5YW	¥1,510,000
P08	CLN-35CHCD2	¥1,380,000	CLN-35CHCD2-5YW	¥1,480,000	P14	NDFR-1320EHC	¥1,500,000	NDFR-1320EHC-5YW	¥1,650,000
P08	CLN-50C	¥1,710,000	CLN-50C-5YW	¥1,860,000	P14	NDFR-1620EHC	¥1,710,000	NDFR-1620EHC-5YW	¥1,860,000
P08	CLN-50CD1	¥1,710,000	CLN-50CD1-5YW	¥1,860,000	P14	NDRG-490EHC	¥1,130,000	NDRG-490EHC-5YW	¥1,230,000
P08	CLN-50CD2	¥1,710,000	CLN-50CD2-5YW	¥1,860,000	P14	NDRG-1080EHC	¥1,250,000	NDRG-1080EHC-5YW	¥1,350,000
P08	CLN-70C	¥2,310,000	CLN-70C-5YW	¥2,460,000	P14	NDRG-1390EHC	¥1,450,000	NDRG-1390EHC-5YW	¥1,550,000
P09	TSX40086FA	¥2,750,000	TSX40086FA-5YW	¥2,900,000	P14	NDRG-1690EHC	¥1,570,000	NDRG-1690EHC-5YW	¥1,720,000
P09	TSX60086FA	¥3,150,000	TSX60086FA-5YW	¥3,300,000	P15	NC-ME25S1HC	¥520,000	NC-ME25S1HC-5YW	¥570,000
P09	VT-78HC	¥540,000	VT-78HC-5YW	¥590,000	P15	NC-ME18HC	¥410,000	NC-ME18HC-5YW	¥460,000
P10	CLN-1700CWE	¥3,170,000	CLN-1700CWE-5YW	¥3,320,000	P15	NC-ME15HC	¥330,000	NC-ME15HC-5YW	¥380,000
P10	CLN-2300CWE	¥3,520,000	CLN-2300CWE-5YW	¥3,670,000	P15	NC-ME31HC	¥470,000	NC-ME31HC-5YW	¥520,000
P10	DTF-35	¥660,000	DTF-35-5YW	¥710,000	P15	NC-ME50EHC	¥800,000	NC-ME50EHC-5YW	¥850,000
P10	SF-53UHC	¥1,220,000	SF-53UHC-5YW	¥1,320,000	P15	NC-ME50REHC	¥900,000	NC-ME50REHC-5YW	¥950,000
P10	SF-3120HC	¥510,000	SF-3120HC-5YW	¥560,000	P15	NC-ME100EHC	¥1,270,000	NC-ME100EHC-5YW	¥1,370,000
P11	NF-75HC	¥280,000	NF-75HC-5YW	¥310,000	P15	NC-ME100REHC	¥1,420,000	NC-ME100REHC-5YW	¥1,520,000
P11	NF-140HC	¥430,000	NF-140HC-5YW	¥480,000	P16	EP-180	¥850,000	EP-180-5YW	¥900,000
P11	NF-200HC	¥470,000	NF-200HC-5YW	¥520,000	P16	EP-400	¥1,100,000	EP-400-5YW	¥1,200,000
P11	NF-300HC	¥500,000	NF-300HC-5YW	¥550,000	P17	LGUEX-1500	¥360,000	LGUEX-1500-5YW	¥410,000
P11	NF-400HC	¥550,000	NF-400HC-5YW	¥600,000	P17	LKEXV-1800	¥260,000	LKEXV-1800-5YW	¥290,000
P11	NF-500HC	¥660,000	NF-500HC-5YW	¥710,000	P17	SRF-FG-5501	¥570,000	SRF-FG-5501-5YW	¥620,000
P11	D-201HC	¥250,000	D-201HC-5YW	¥280,000	P17	SCF-FG-4002	¥580,000	SCF-FG-4002-5YW	¥630,000
P11	D-271HC	¥270,000	D-271HC-5YW	¥300,000	P18	MC-8EC	¥1,020,000	MC-8EC-5YW	¥1,120,000
P11	D-396HC	¥320,000	D-396HC-5YW	¥370,000	P18	MC-20EC	¥1,280,000	MC-20EC-5YW	¥1,380,000
P12	GS-1376HC	¥170,000	GS-1376HC-5YW	¥200,000	P18	MC-30EC	¥1,450,000	MC-30EC-5YW	¥1,550,000
P12	GS-310HC	¥420,000	GS-310HC-5YW	¥470,000	P18	A-750EC	¥960,000	A-750EC-5YW	¥1,010,000
P12	GS-570HC	¥550,000	GS-570HC-5YW	¥600,000	P19	NRB-14A	¥490,000	NRB-14A-5YW	¥540,000
P12	KGT-370HC	¥490,000	KGT-370HC-5YW	¥540,000	P19	NRB-14LA	¥700,000	NRB-14LA-5YW	¥750,000
P12	KX-1021HC	¥140,000	KX-1021HC-5YW	¥170,000	P19	NRB-32A	¥700,000	NRB-32A-5YW	¥750,000
P12	GX-823HC	¥150,000	GX-823HC-5YW	¥180,000	P19	NRB-32LA	¥920,000	NRB-32LA-5YW	¥970,000
P13	UKS-390HC	¥390,000	UKS-390HC-5YW	¥440,000	P19	NRB-41A	¥960,000	NRB-41A-5YW	¥1,010,000
P13	UKS-550HC	¥480,000	UKS-550HC-5YW	¥530,000	P19	NRB-41LA	¥1,180,000	NRB-41LA-5YW	¥1,280,000

※通常保証は保証期間が1年となります（TSXシリーズのみ2年保証）。

超低温から低温・恒温環境まで、幅広く

一人ひとりの研究者から企業の大プロジェクトまで、冷蔵・冷凍のあらゆるニーズにお応えするために、日本フリーザーはたゆまない技術開発力を駆使して、安全で信頼ある製品づくりを心がけ、提供できる

超低温槽・フリーザー・保冷库等

-85℃/-90℃

フリーズ超低温槽
▶▶ P6-8



-50℃/-40℃

スーパーフリーザー
▶▶ P10



-28℃/-35℃

バイオフリーザー
▶▶ P12



-150℃

フリーズ超低温槽
▶▶ P10



-86℃

超低温フリーザー
▶▶ P9



-80℃

マイバイオ
▶▶ P9



-60℃

フリーズ ▶▶ P11



-35℃

バイオフリーザー
▶▶ P11



-28℃

ミニキューブ
(小型冷凍庫) ▶▶ P12



-150℃

-90℃

-80℃

-60℃

-40℃

-30℃

-20℃

防
爆
製
品

-26℃

リーペヘル庫内防爆
冷凍庫 ▶▶ P17



-20℃

防爆冷凍庫 ▶▶ P16



さまざまな温度帯域をカバーします。

よう励んでいます。

-30℃/+4℃

バイオマルチクーラー
▶▶ P12

+4℃

ミニキューブ
(小型冷蔵庫)
▶▶ P12



バイオ
メディカル
クーラー
▶▶ P13



薬用冷蔵
ショーケース
▶▶ P15



クロマト
チャンバー
▶▶ P18



メディカル
チャンバー
▶▶ P18



バイオ
ショーケース
▶▶ P13



-30℃/+4℃

薬用冷凍冷蔵庫
▶▶ P15



-25℃~+12℃

保冷库 ▶▶ P14

℃ 0℃ +4℃ +10℃

+4℃

防爆冷蔵庫 ▶▶ P16



-30℃/+4℃

リーペル庫内防爆
冷凍冷蔵庫
▶▶ P17



+2℃~+16℃

リーペル庫内防爆冷蔵庫
▶▶ P17



-20℃~+10℃

ユニット式大型防爆冷蔵庫
▶▶ P17

インキュベーター
(-10℃~+50℃)

▶▶ P19



プレハブ低温・恒温室

▶▶ P19



液体窒素保存容器

(エアリキッド社) ▶▶ P20



製氷機

▶▶ P20



ポータブルフリーザー

▶▶ P21



バイセル

▶▶ P21



温度記録計・温度ロガー

▶▶ P23-25



フリーズ超低温槽

ノンフロン製品

−85℃/−90℃

(周囲温度30℃時)

ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZER

リニューアル! [HFC冷媒⇒HC冷媒(ノンフロン)]
ダブル冷却システムで貴重なサンプルを安全・安心保存。

ダブル冷却
システム



フロン排出抑制法
対象外



CLN-32UWHC



CLN-52UWHC



CLN-35CWHC



CLN-50CWHC



CLN-72UWHC



CLN-70CWHC

《特 長》

- ① オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を採用。
フロン排出抑制法の対象外製品であり、冷媒回収や簡易点検等の
管理義務が発生しません。
- ② 当社独自の新技术、ダブル冷却システムを採用。仮に1システムに
異常が生じても庫内を超低温に維持可能。
(−80℃設定で庫内を約−65℃以下に維持可能)
- ③ 煩わしいフィルター(凝縮器)清掃をカット。
- ④ 温度上昇・停電警報・外部警報出力端子・鍵を標準装備。
- ⑤ 扉周りの霜付き軽減及び扉の開閉を容易にするために、縦型モデル
の扉構造に各種工夫。
- ⑥ GMP/GLPに対応するためのバリデーションサービスが実施可能
(オプション対応)。

※オプションはP7参照。

●仕様

モ デ ル	CLN-32UWHC	CLN-52UWHC	CLN-72UWHC	CLN-35CWHC	CLN-50CWHC	CLN-70CWHC
製 品 形 状	アップライトタイプ(縦型)			チェストタイプ(横型)		
冷 却 性 能	−90℃/常用−75℃〜−85℃			−85℃/常用−70℃〜−80℃		
内 容 積	約324ℓ	約548ℓ	約781ℓ	約354ℓ	約507ℓ	約710ℓ
外 寸 法 (mm)	W(715+68)×D(765+102)×H1985	W(870+68)×D(905+102)×H1985	W(1110+68)×D(925+102)×H1975	W1630×D(715+150)×H1030	W2080×D(715+150)×H1030	W2080×D(865+150)×H1075
内 寸 法 (mm)	W475×D520×H1340	W630×D660×H1340	W870×D680×H1340	W1040×D490×H695	W1490×D490×H695	W1490×D640×H745
重 量	約250kg	約300kg	約340kg	約250kg	約290kg	約320kg
圧縮機定格出力	750W×2			750W×2		
冷 媒	混合冷媒(HCノンフロン)			混合冷媒(HCノンフロン)		
電 源	3φ200V 50/60Hz 15A			3φ200V 50/60Hz 15A		
定格消費電力	1100/1250W	1150/1260W	1180/1270W	930/1030W	1020/1120W	1030/1150W
価 格	¥1,820,000	¥2,260,000	¥2,700,000	¥1,810,000	¥2,180,000	¥2,600,000

フリーズ超低温槽

ノンフロン製品

-90℃ (周囲温度30℃時)

ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZER

ダブル冷却システムで貴重なサンプルを
安全・安心保存。AC100V／1φ200V仕様。

NEW

ダブル冷却
システム



フロン排出抑制法対象外

《特長》

- ①設置場所における電源確保が容易なAC100V／1φ200V仕様。
- ②インバーター圧縮機を採用。状況に応じた効率の良い運転で、省エネ効果を発揮します。

※その他の特長はP6参照。

●仕様

モ デ ル	CLN-32UWHCD1	CLN-32UWHCD2	CLN-52UWHCD1	CLN-52UWHCD2
製 品 形 状	アップライトタイプ(縦型)			
冷 却 性 能	-90℃／常用-75℃～-85℃			
内 容 積	約324ℓ		約548ℓ	
外 寸 法(mm)	W(715+68)×D(818+49)×H1985		W(870+68)×D(905+102)×H1985	
内 寸 法(mm)	W475×D520×H1340		W630×D660×H1340	
重 量	約250kg		約300kg	
圧縮機定格出力	625W(インバータ)×2			
冷 媒	混合冷媒(HCノンフロン)			
電源(50/60Hz)	AC100V 15A	1φ200V 15A	AC100V 15A	1φ200V 15A
定格消費電力	710／710W	710／710W	760／750W	760／750W
価 格	¥1,820,000	¥1,880,000	¥2,260,000	¥2,320,000



CLN-32UWHCD1
CLN-32UWHCD2

CLN-52UWHCD1
CLN-52UWHCD2


フリーズ超低温槽専用オプション

■トレイ各種

●標準トレイ



●フリーズボックス用トレイ

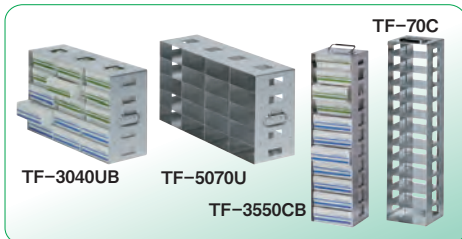

注:トレイにフリーズボックスは、付属されません。

●マイクロプレート用トレイ



注:トレイにマイクロプレートは、付属されません。

●標準トレイ

トレイ型式	外寸法(mm)	引出し1個の内寸法(mm)	価格	対応モデル	総トレイ数
TN-30U	W440×D(470+10)×H280	W138×D464×H133	¥53,000/本	CLN-32UHC, 32UWHC	4本(W1×H4)
TN-42U	W600×D(470+10)×H280	W191×D464×H133	¥68,000/本	CLN-42U	4本(W1×H4)
TN-52U	W600×D(610+10)×H280	W191×D604×H133	¥74,000/本	CLN-52U, 52UWHC	4本(W1×H4)
TN-72U	W420×D(630+10)×H280	W201×D624×H133	¥52,000/本	CLN-72UWHC	8本(W2×H4)
TN-3550C	W200×D155×H(635+10)	W190×D149×H121	¥24,000/本	CLN-35CHC, 35CWHC	15本(W5×D3)
TN-70C	W200×D155×H(685+10)	W190×D149×H121 (最下段:H171)	¥25,000/本	CLN-50C, 50CWHC	21本(W7×D3)
				CLN-70C, 70CWHC	28本(W7×D4)

●フリーズボックス用トレイ(フリーズボックス81本立に対応)

注:CLNシリーズは、当トレイを基本に設計されています。

トレイ型式	外寸法(mm)	ボックス収納数	価格	対応モデル	総トレイ数	総ボックス数
TF-3040U	W140×D(424+10)×H281	15個/本 (H5×D3)	¥20,000/本	CLN-32UHC, 32UWHC	12本(W3×H4)	180個
				CLN-42U	16本(W4×H4)	240個
TF-5070U	W140×D(565+10)×H281	20個/本 (H5×D4)	¥23,000/本	CLN-52U, 52UWHC	16本(W4×H4)	320個
				CLN-72UWHC	24本(W6×H4)	480個
TF-3550C	W144×D144×H(618+10)	11個/本	¥22,000/本	CLN-35CHC, 35CWHC	21本(W7×D3)	231個
				CLN-50C, 50CWHC	30本(W10×D3)	330個
TF-70C	W144×D144×H(674+10)	12個/本	¥23,000/本	CLN-70C, 70CWHC	40本(W10×D4)	480個

注:対象フリーズボックスサイズ IB-02081:W134×D134×H52mm

●フリーズボックス用トレイ(フリーズボックス100本立に対応)

トレイ型式	外寸法(mm)	ボックス収納数	価格	対応モデル	総トレイ数	総ボックス数
TF-3040UB	W150×D(460+10)×H281	15個/本 (H5×D3)	¥23,000/本	CLN-32UHC, 32UWHC	12本(W3×H4)	180個
				CLN-42U	16本(W4×H4)	240個
TF-5070UB	W150×D(613+10)×H281	20個/本 (H5×D4)	¥25,000/本	CLN-52U, 52UWHC	16本(W4×H4)	320個
				CLN-72UWHC	20本(W5×H4)	400個
TF-3550CB	W155×D152×H(618+10)	11個/本	¥24,000/本	CLN-35CHC, 35CWHC	18本(W6×D3)	198個
				CLN-50C, 50CWHC	27本(W9×D3)	297個
TF-70CB	W155×D152×H(674+10)	12個/本	¥25,000/本	CLN-70C, 70CWHC	36本(W9×D4)	432個

注:対象フリーズボックスサイズ IB-02100:W147×D147×H52mm


●マイクロプレート用トレイ

トレイ型式	外寸法(mm)	プレート収納数	価格	対応モデル	総トレイ数	総プレート数
TM-3040UB	W137×D(471+10)×H280	80枚/本 (H16×D5)	¥28,000/本	CLN-32UHC, 32UWHC	12本(W3×H4)	960枚
				CLN-42U	16本(W4×H4)	1280枚
TM-5070UB	W137×D(565+10)×H280	96枚/本 (H16×D6)	¥32,000/本	CLN-52U, 52UWHC	16本(W4×H4)	1536枚
				CLN-72UWHC	24本(W6×H4)	2304枚

注:対象マイクロプレートのサイズ:W128×D86×H16mm(96ウェル)

■フリーズボックス

超低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。

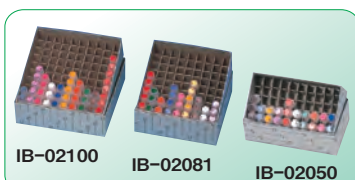

型 式	IB-02100	IB-02081	IB-02050
外寸法W×D×H(mm)	147×147×52	134×134×52	79×147×52
適合チューブサイズ(ml)	1.2, 2.0		
チューブ立数	100本	81本	50本
包 装	1ケース(20個入り)		
ケース価格	¥27,760	¥27,760	¥21,660

注:ボックスにチューブは付属されません。

注:温度記録計については、P23~25参照(CLNへの記録計取付は、本体と同時に注文時は工賃サービス)

■自動冷却補助装置CO2(ボンベなし)

異常温度上昇時、LCO2を自動噴射。
バッテリー充電式12V(約48時間作動可能)
ホース長:標準3m

¥240,000(冷媒HFC用、機械室内設置)

¥280,000(冷媒HC用、外付け本体上部設置)

注1:価格は本体と同時に注文時、工賃込み。

注2:自動冷却補助装置には液化炭酸ガス、サイホン式ボンベを使用してください。

フリーズ超低温槽

-85℃ (周囲温度30℃時)

ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZER

独自の技術搭載! シンプルなワンコンプレッサーシステムで
安価、低故障率を実現。

CLN-32UHC
CLN-32UHCD2

CLN-42U

CLN-52U
CLN-52UD1
CLN-52UD2

CLN-35CHC
CLN-35CHCD2

CLN-50C
CLN-50CD1/CLN-50CD2

CLN-70C

《特 長》

- ① 当社独自に開発した、冷凍機1台によるワンコンプレッサーシステムを採用。従来の冷凍機2台による二元冷却システムと比較し、システム構造が大幅に単純化され、故障発生率が著しく低減。
- ② CLN-32UHC/32UHCD2/35CHC/35CHCD2は、オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を採用。
- ③ 煩わしいフィルター（凝縮器）清掃をカット。
- ④ 温度警報・停電警報等を標準で装備。
- ⑤ 本体から離れた場所で機器の異常を知らせる遠隔警報（温度警報・停電警報）に必要な接点を標準で装備。
- ⑥ 扉周りの霜付き軽減及び扉の開閉を容易にするために、縦型モデルの扉構造に各種工夫。
- ⑦ GMP/GLPに対応するためのバリデーションサービスが実施可能（オプション対応）。

※オプションはP7参照。

●仕様(縦型モデル)

モデル	CLN-32UHC	CLN-32UHCD2	CLN-42U	CLN-52U	CLN-52UD1	CLN-52UD2
冷却性能	-85℃/常用-70℃~-80℃					
内容積	約324ℓ		約430ℓ	約548ℓ		
外寸法(mm)	W(715+68)×D(765+102)×H1975		W(870+68)×D(765+102)×H1975	W(870+68)×D(905+102)×H1975		
内寸法(mm)	W475×D520×H1340		W630×D520×H1340	W630×D660×H1340		
重量	約170kg		約190kg	約210kg		
圧縮機定格出力	940W(インバーター)		750W	1100W	750W	750W
冷媒	混合冷媒(HCノンフロン)		混合冷媒(HFC)			
電源	AC100V 50/60Hz 15A	1φ200V 50/60Hz 15A	3φ200V 50/60Hz 15A	3φ200V 50/60Hz 15A	AC100V 50/60Hz 15A	1φ200V 50/60Hz 15A
定格消費電力	610/620W	600/600W	640W	780W	690W	680W
温度警報・停電警報	設定値から15℃温度上昇時及び停電時にブザー報知、バッテリー充電式2.5V(48時間作動可能)					
付属品等	仕切棚3枚、鍵2種(各2本)、キャスター4個、アジャスター2個、アクセスポート背面1カ所(φ20mm)					
価格	¥1,440,000		¥1,740,000	¥1,820,000		

●仕様(横型モデル)

モデル	CLN-35CHC	CLN-35CHCD2	CLN-50C	CLN-50CD1	CLN-50CD2	CLN-70C
冷却性能	-85℃/常用-70℃~-80℃					
内容積	約354ℓ		約507ℓ			約710ℓ
外寸法(mm)	W1630×D(715+150)×H1030		W2080×D(715+150)×H1030			W2080×D(865+150)×H1075
内寸法(mm)	W1040×D490×H695		W1490×D490×H695			W1490×D640×H745
重量	約180kg		約200kg			約220kg
圧縮機定格出力	660W	660W	750W	750W	750W	1100W
冷媒	混合冷媒(HCノンフロン)			混合冷媒(HFC)		
電源	AC100V 50/60Hz 15A	1φ200V 50/60Hz 15A	3φ200V 50/60Hz 15A	AC100V 50/60Hz 15A	1φ200V 50/60Hz 15A	3φ200V 50/60Hz 15A
定格消費電力	600/600W	610/590W	640W	600W	610W	820W
温度警報・停電警報	設定値から15℃温度上昇時及び停電時にブザー報知、バッテリー充電式2.5V(48時間作動可能)					
付属品等	鍵2種(各2本)、キャスター4個、アジャスター2個、アクセスポート背面1カ所(φ20mm)					
価格	¥1,380,000		¥1,710,000			¥2,310,000

超低温フリーザー

ノンフロン製品

-86℃ 常用-50℃~-80℃
(周囲温度32℃時)

ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZER

革新的テクノロジーを駆使した
フラグシップモデル。

TSX40086FA

《特長》

- ① オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を採用。
- ② ユニバーサル電源(AC100V~230V)を採用。
- ③ 新冷却システム「V-Drive制御」を採用(省エネ運転)。
- ④ 操作性、視認性に優れたタッチスクリーンパネルを採用。
- ⑤ 温度データの出力が可能(記録計不要)。
- ⑥ 低ノイズレベルを実現。

●仕様

モデル	TSX40086FA	TSX60086FA
冷却性能	-86℃/常用-40℃~-80℃	
内容積	約549ℓ	約816ℓ
外寸法(mm)	W(720+110)×D(910+135)×H1981	W(1006+110)×D(910+135)×H1981
内寸法(mm)	W588×D719×H1301	W873×D719×H1301
重量	約270kg	約316kg
圧縮機定格出力	高温側:625W、低温側:625W	
冷媒	高温側:R-290(HCノンフロン)、低温側:R-290+R170(HCノンフロン)	
電源	AC100V~230V 50/60Hz 15A	
定格消費電力	600W	600W
価格	¥2,750,000	¥3,150,000



TSX60086FA



フロン排出抑制法
対象外

《オプション》 ●標準トレイ




TN-40T
¥92,000/本



TN-60T
¥63,000/本

●フリーズボックス用トレイ (81本立て用)

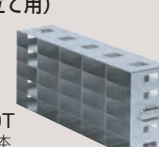

TF-4060T
¥28,000/本

フルセット 本数

対応モデル	TN-40T	TN-60T	TF-4060T
TSX40086FA	4本(W1×H4)	—	16本(W4×H4)
TSX60086FA	—	8本(W2×H4)	24本(W6×H4)

注：詳細は単品カタログをご参照ください。

マイ バイオ

ノンフロン製品

-80℃ 常用-60℃~-80℃
(周囲温度30℃時)

MY BIO

「一人に一台、超低温槽を…」、自分専用の超低温槽。
コンパクトで、低価格を実現。

《オプション》

●標準トレイ



TN-78



TN-208S




TN-208

〈VT-78HC用〉 〈VT-208HC用〉 〈VT-208HC用〉
¥20,000/本 ¥18,000/本 ¥23,000/本
(フルセット4本) (フルセットTN-208S:2本,TN-208:6本)

●フリーズボックス用トレイ



TF-78

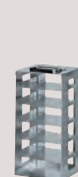

TF-208A~F

〈VT-78HC用〉 〈VT-208HC用〉
¥19,000/本 ¥18,000/本
~¥23,000/本
(フルセット4本)

注：フルセット本数は単品カタログ参照。



VT-78HC



VT-208HC



フロン排出抑制法
対象外

ワンコンプレッサー
システム

RoHS対応

《特長》

- ① オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。
- ② 独自の新技术ワンコンプレッサーシステムの採用により、低価格、低消費電力、静音化を実現。
- ③ 省スペースにて設置が可能。
- ④ 煩わしいフィルター(凝縮器)清掃をカット。
- ⑤ 温度上昇警報・停電警報・外部警報出力端子・アクセスポート・鍵を標準装備。

《オプション》

- 温度計(サーモレコーダー) P23参照

●仕様

モデル	VT-78HC	VT-208HC
冷却性能	-60℃~-80℃	
内容積	約70ℓ	約191ℓ
外寸法(mm)	W557×D(557+88)×H887	W925×D(605+88)×H845
内寸法(mm)	W387×D387×H470(有効H425)	W755×D435×H650(有効H605)
重量	約45kg	約64kg
圧縮機定格出力	375W	560W
冷媒	混合冷媒(HCノンフロン)	
電源	AC100V 50/60Hz 15A	
定格消費電力	250/260W	330/340W
価格	¥540,000	¥690,000

フリーズ超低温槽

-150℃ 常用-140℃~-150℃
(周囲温度30℃時)

ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZER

細胞(iPS/ES)・組織の長期保存用。ガラス化温度(再結晶点以下)を実現。

《オプション》 ●標準トレー

TN-3550C
¥24,000/本

●フリーズ ボックス用 トレー (100本立て用)

TF-3550CB
¥24,000/本

●自動冷却補助装置(ボンベなし)

・LCO₂方式(液化炭酸ガス) 価格 ¥240,000
・LN₂方式(液体窒素) 価格 ¥340,000

対応モデル	TN-3550C	TF-3550CB
CLN-1700CWE	6本(W2×D3)	9本(W3×D3)
CLN-2300CWE	9本(W3×D3)	12本(W4×D3)

●仕様

モデル	CLN-1700CWE	CLN-2300CWE
冷却性能	-140℃~-150℃	
内容積	約176ℓ	約236ℓ
外寸法(mm)	W1420×D(840+298)×H1090	W1600×D(840+298)×H1090
内寸法(mm)	W500×D500×H705	W680×D500×H695
重量	約323kg	約340kg
圧縮機定格出力	1100W×2	1100W×2
冷媒	混合冷媒(HFC)	
電源	3φ200V 50/60Hz 20A	
定格消費電力	1480/1550W	1690/1750W
価格	¥3,170,000	¥3,520,000



CLN-1700CWE

CLN-2300CWE

《特長》

- ①当社独自の新技术、ダブル冷却システムを採用。仮に1システムに異常が生じても超低温を維持可能。(-150℃設定で、庫内を約-140℃以下に維持可能)
- ②断熱厚は、一般的な超低温槽(-80℃、120mm)の約1.5倍(170mm)。万が一のトラブル時にもサンプルダメージを軽減します。
- ③煩わしいフィルター(凝縮器)清掃をカット。
- ④温度上昇警報・停電警報・外部警報出力端子・鍵を標準装備。

マイバイオキューブ

MYBIO CUBE

研究者の理想形であるパーソナルユースを実現。コンパクト設計。無駄なスペースを有効活用。

《特長》

- ①卓上型なのにパワフルなコンプレッサ方式を採用。
- ②当社独自の新冷却システムと真空断熱材の採用により、コンパクトボディを実現。(従来の冷却・断熱方式と比較し、設置面積を約30%縮小)
- ③煩わしいフィルター(凝縮器)清掃をカット。
- ④フリーズボックスが20個収納可能。

●仕様

モデル	DTF-35
冷却性能	-85℃/常用-70℃~-80℃
内容積	約35ℓ
外寸法(mm)	W(460+35)×D(620+40)×H680
内寸法(mm)	W336×D356×H295
重量	約65kg
圧縮機定格出力	375W
冷媒	混合冷媒(HFC)
電源	AC100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	400/400W
価格	¥660,000

《オプション》

●標準トレー (TN-35) ¥42,000/本



●フリーズボックス用トレー (TF-35) ¥28,000/本



●ステンレス架台 (WT-6060) ¥40,000/台



DTF-35

ワンコンプレッサ
システム

スーパーフリーザー

-50℃/-40℃ (周囲温度30℃時)

SUPER FREEZER

試薬、凍結血漿、各種研究用サンプル等、最適な低温保存環境を創出!

《特長》

- ①オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促進しないノンフロン冷媒を採用。
- ②上下の棚や壁面から直接冷却する無風冷却方式により、無風で温度変化の少ない保存が可能。
- ③煩わしいフィルター(凝縮器)清掃をカット。
- ④自動霜取り方式ではないので、定期的な温度上昇なし。
- ⑤SF-3120HCは、保存物の出し入れ・整理に便利な引き出し式を採用。

●仕様

モデル	SF-53UHC	SF-3120HC
冷却性能	-40℃~-50℃	-30℃~-40℃
内容積	約530ℓ	約310ℓ
外寸法(mm)	W(830+68)×D(820+102)×H1810	W660×D(675+35)×H1840
重量	約185kg	約75kg
圧縮機定格出力	625W	560W
冷媒	混合冷媒(HCノンフロン)	R-290(HCノンフロン)
電源	AC100V 50/60Hz 15A	
定格消費電力	590/580W	230/220W
価格	¥1,220,000	¥510,000



SF-53UHC



SF-3120HC

フリーズ



/// **-60℃** 常用-45℃~-60℃
(周囲温度30℃時)

FREEZE

コンパクトで冷却能力抜群、省スペースにジャストフィット、多目的な高性能フリーザー。



フロン排出抑制法対象外



NF-140HC



NF-400HC

RoHS対応

《特長》

- ① オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さない
ノンフロン冷媒を採用。
- ② 扉開閉に伴う冷気漏れの少ないチェストタイプ。
- ③ 大小6機種をラインアップ。
- ④ 煩わしいフィルター(凝縮器)清掃をカット。

●専用アルミトレイ 《オプション》

TN-78 ¥20,000/本	TN-208 ¥23,000/本	TN-3550C ¥24,000/本
--------------------	---------------------	-----------------------

●NFシリーズ専用アルミトレイ

対応モデル	トレイ形式	フルセット本数
NF-75HC	TN-78	4本(W2×D2)
NF-140HC	TN-208	4本(W2×D2)
NF-200HC	TN-208	6本(W3×D2)
NF-300HC	TN-208	10本(W5×D2)
NF-400HC	TN-208	14本(W7×D2)
NF-500HC	TN-3550C	18本(W6×D3)

●仕様

モデル	NF-75HC	NF-140HC	NF-200HC	NF-300HC	NF-400HC	NF-500HC
冷却性能	-45℃~-60℃					
内容積	約70ℓ	約134ℓ	約191ℓ	約287ℓ	約372ℓ	約477ℓ
外寸法(mm)	W557×D(557+88)×H887	W725×D(605+88)×H845	W925×D(605+88)×H845	W1265×D(605+88)×H845	W1565×D(605+88)×H845	W1665×D(665+103)×H890
内寸法(mm)	W387×D387×H470	W555×D435×H650	W755×D435×H650	W1095×D435×H650	W1395×D435×H650	W1495×D495×H680
重量	約43kg	約59kg	約64kg	約76kg	約88kg	約107kg
圧縮機定格出力	190W	375W	375W	560W	560W	560W
冷媒	混合冷媒(HCノンフロン)					
電源	AC100V 50/60Hz 15A					
定格消費電力	180/180W	300/330W	260/270W	320/330W	350/360W	360/370W
価格	¥280,000	¥430,000	¥470,000	¥500,000	¥550,000	¥660,000

バイオフィリーザー



/// **-35℃** 常用-15℃~-35℃
(周囲温度30℃時)

BIO FREEZER

チェストタイプのコンパクト設計で低価格、安定した冷却性能を発揮。



フロン排出抑制法対象外

《特長》

- ① オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さない
ノンフロン冷媒を採用。
- ② 扉開閉に伴う冷気漏れの少ないチェストタイプ。
- ③ 煩わしいフィルター(凝縮器)清掃をカット。
- ④ 出し入れに便利な収納バスケット付き。
- ⑤ 温度上昇警報、鍵を標準装備。

●仕様

モデル	D-201HC	D-271HC	D-396HC
冷却性能	-15℃~-35℃		
内容積	約180ℓ	約250ℓ	約365ℓ
外寸法(mm)	W720×D(605+85)×H840	W925×D(605+85)×H840	W1265×D(605+85)×H840
内寸法(mm)	W620×D500×H680	W820×D500×H680	W1160×D500×H680
重量	約42kg	約50kg	約62kg
圧縮機定格出力	250W	250W	375W
冷媒	R-290(HCノンフロン)		
電源	AC100V 50/60Hz 15A		
定格消費電力	180/160W	180/160W	200/200W
価格	¥250,000	¥270,000	¥320,000

D-201HC



D-396HC

RoHS対応

バイオフィリーザー

ノンフロン製品

-28℃/-35℃

常用-14℃~-28℃
常用-20℃~-35℃
(周囲温度30℃時)

BIO FREEZER

引き出し式冷凍庫だから、保存物の整理や出し入れが
とても簡単。

《特長》

- ① オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を採用。
- ② 直接(壁面)冷却方式により、無風で温度変化の少ない保存が可能。
- ③ 庫内は引き出し式を採用。扉の開閉時の冷氣もれを防ぐとともに、保存物の出し入れ・整理に便利です。
- ④ 自動霜取り方式ではないので、定期的な温度上昇なし。
- ⑤ GS-310HCとGS-570HCは充実した警報機能を標準装備(温度上下限警報、扉警報、外部警報出力)。

●仕様

モ デ ル	GS-1376HC	GS-310HC	GS-570HC
冷 却 性 能	-14℃～-28℃	-20℃～-35℃	
内 容 積	約104ℓ	約316ℓ	約573ℓ
外 寸 法(mm)	W555×D(625+30)×H850	W600×D(660+43)×H1884	W750×D(775+43)×H1884
収納ボックス	4個	6個	12個
重 量	約42kg	約82kg	約109kg
圧縮機定格出力	125W	150W(インバータ)	
冷 媒	R-600a(HCノンフロン)	R-290(HCノンフロン)	
電 源	AC100V 50/60Hz 15A		
定格消費電力	80/90W	180/180W	190/180W
価 格	¥170,000	¥420,000	¥550,000

GS-1376HC

NEW



GS-310HC

RoHS対応

NON-FREON

フロン排出抑制法対象外

NEW



GS-570HC

バイオマルチクーラー

ノンフロン製品

冷蔵室 +4℃
冷凍室 -30℃

常用+3℃~-16℃
(周囲温度30℃時)
常用-9℃~-30℃
(周囲温度30℃時)

BIO MULTIPLE COOLER

保存温度の多様化に対応する幅広い温度域、試料の
冷凍・冷蔵保存に最適のクーラー。

《特長》

- ① オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。
- ② 冷蔵室の棚は約30mmピッチで上下に移動可能。大小の保存物を効率よく収納可能。
- ③ 冷凍室は引き出し式。扉の開閉時の冷氣もれを防ぐとともに、保存物の出し入れ・整理に便利。
- ④ 充実した警報機能を標準装備(温度上下限警報、扉警報、外部警報出力)。
- ⑤ 冷蔵室は保安機能付き(庫内凍結防止)。

●仕様

モデル	KGT-370HC
冷却性能	冷蔵室: +3℃~-16℃/冷凍室: -9℃~-30℃
内容積	冷蔵室: 約267ℓ/冷凍室: 約110ℓ
外寸法(mm)	W600×D(650+43)×H2044
収納ボックス	3個(冷凍室)
重量	約82kg
圧縮機定格出力	190W(インバータ)
冷媒	R-600a(HCノンフロン)
電源	AC100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	110/110W
価格	¥490,000



フロン排出抑制法対象外



KGT-370HC

RoHS対応

ミニキューブ

ノンフロン製品

冷凍庫 -28℃
冷蔵庫 +4℃

常用-14℃~-28℃
(周囲温度30℃時)
常用+2℃~-10℃
(周囲温度30℃時)

MINI CUBE

利用頻度の高いサンプルを、直ぐお手元で冷蔵・冷凍保管。

《特長》

- ① オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。
- ② 高さ約630mmのコンパクト設計。スペースを有効活用できます。
注: 実験台等の下に設置する場合は、上方に40mmの隙間を確保して下さい。
- ③ 扉の開閉時に冷氣もれを防ぐとともに、保存物の出し入れ・整理に便利な引き出し式を採用。(KX-1021HCは一部引き出し式)
- ④ 無風冷却方式により、無風で温度変化の少ない保存が可能。
注: 高温多湿の季節には、扉周りに結露が出ることがあります。

●仕様

モデル	KX-1021HC	GX-823HC
冷却性能	+2℃~-10℃	-14℃~-28℃
内容積	約92ℓ	約69ℓ
外寸法(mm)	W550×D620×H630	W550×D620×H630
重量	約32kg	約33kg
圧縮機定格出力	125W	125W
冷媒	R-600a(HCノンフロン)	
電源	AC100V 50/60Hz 15A	
定格消費電力	70/70W	80/80W
価格	¥140,000	¥150,000



フロン排出抑制法対象外



KX-1021HC



GX-823HC

RoHS対応

バイオメディカルクーラー

ノンフロン製品

+4°C 常用+3°C~+16°C
(周囲温度30°C時)

BIO MEDICAL COOLER

収納スペースを最大限有効利用できる、多目的冷蔵庫。

- 《特長》 ①オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。 ③充実した警報機能を標準装備(温度上下限警報、扉警報、外部警報出力)。
②棚は約30mmピッチで上下に移動可能。 ④保安機能付き(庫内凍結防止)。
大小の保存物を効率よく収納可能。

●仕様

モデル	UKS-390HC	UKS-550HC
冷却性能	+3°C~+16°C	
内容積	約394ℓ	約558ℓ
外寸法(mm)	W600×D(650+43)×H1884	W750×D(765+43)×H1684
重量	約66kg	約80kg
圧縮機定格出力	80W	80W
冷媒	R-600a(HCノンフロン)	
電源	AC100V 50/60Hz 15A	
定格消費電力	90/100W	90/100W
価格	¥390,000	¥480,000



UKS-390HC

RoHS対応



UKS-550HC



フロン排出抑制法対象外

バイオショーケース

ノンフロン製品

+4°C 常用+3°C~+16°C
(周囲温度30°C時)

BIO SHOWCASE

庫内が一目で確認できる多目的ショーケース。

- 《特長》 ①オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。 ③充実した警報機能を標準装備(温度上下限警報、扉警報、外部警報出力)。
②棚は約30mmピッチで上下に移動可能。 ④保安機能付き(庫内凍結防止)。
大小の保存物を効率よく収納可能。

●仕様

モデル	UKSG-420HC	UKSG-580HC
冷却性能	+3°C~+16°C	
内容積	約420ℓ	約588ℓ
外寸法(mm)	W600×D(650+43)×H1884	W750×D(765+43)×H1684
重量	約80kg	約95kg
圧縮機定格出力	80W	80W
冷媒	R-600a(HCノンフロン)	
電源	AC100V 50/60Hz 15A	
定格消費電力	90/110W	100/110W
価格	¥420,000	¥530,000



UKSG-420HC

RoHS対応



UKSG-580HC



フロン排出抑制法対象外

注:高温多湿の季節には、正面ガラスに結露が出ることがあります。

バイオショーケース

ノンフロン製品

+4°C 常用+4°C~+16°C
(周囲温度30°C時)

BIO SHOWCASE

庫内が一目で確認できる多目的ショーケース。

- 《特長》 ①オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。 ③充実した警報機能を標準装備(温度上下限警報、扉警報、外部警報出力)。
②棚は約30mmピッチで上下に移動可能。 ④保安機能付き(庫内凍結防止)。
大小の保存物を効率よく収納可能。

●仕様

モデル	LKUV-1613HC
冷却性能	+3°C/常用+4°C~+16°C
内容積	約152ℓ
外寸法(mm)	W600×D(615+50)×H820
重量	約43kg
圧縮機定格出力	90W
冷媒	R-600a(HCノンフロン)
電源	AC100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	90/90W
価格	¥300,000



LKUV-1613HC

RoHS対応



フロン排出抑制法対象外

注:高温多湿の季節には、正面ガラスに結露が出ることがあります。

保 冷 庫

ノンフロン製品

-25℃~+12℃

(周囲温度30℃時)

REFRIGERATOR & FREEZER

インバータ制御による省エネタイプ。

冷蔵・冷凍・冷凍冷蔵、サイズもいろいろ、幅広い用途にお応えします。



フロン排出抑制法対象外



NDR-480EHC



NDR-1080EHC



NDR-1670EHC



NDRG-1080EHC

- 《特 長》 ① オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。 ② インバータ制御方式による省エネタイプ。
③ 外装・内装ともに、腐食に強いステンレス製(NDRGを除く)。 ④ 自動霜取り方式を採用。冷却器への霜付きを定期的に除去。
⑤ 保存物の管理に便利な鍵付き(NDRGを除く)。 ⑥ NDRGの扉は、庫内が視認しやすいワイドガラス。

●仕様(冷蔵タイプ)

モデル	NDR-480EHC	NDR-630EHC	NDR-780EHC	NDR-1080EHC	NDR-1380EHC	NDR-1670EHC
冷却性能	-7℃~+12℃					
内容積	約485ℓ	約639ℓ	約783ℓ	約1085ℓ	約1388ℓ	約1684ℓ
外寸法(mm)	W600×D800×H1905	W750×D800×H1905	W900×D800×H1905	W1200×D800×H1905	W1500×D800×H1905	W1800×D800×H1905
扉	ステンレス鋼板・2枚		ステンレス鋼板・4枚			ステンレス鋼板・6枚
重量	約84kg	約93kg	約106kg	約123kg	約150kg	約171kg
圧縮機定格出力	320W	320W	320W	320W	400W	400W
冷媒	R-600a(HCノンフロン)	R-600a(HCノンフロン)	R-600a(HCノンフロン)	R-600a(HCノンフロン)	R-290(HCノンフロン)	R-290(HCノンフロン)
電源	AC100V 50/60Hz 15A					
定格消費電力	139/139W	139/139W	139/139W	139/139W	264/264W	264/264W
価格	¥850,000	¥950,000	¥1,060,000	¥1,130,000	¥1,260,000	¥1,390,000

●仕様(冷凍タイプ)

モデル	NDF-480EHC	NDF-630EHC	NDF-780EHC	NDF-1070EHC	NDF-1360EHC	NDF-1660EHC
冷却性能	-8℃~-25℃					
内容積	約485ℓ	約639ℓ	約783ℓ	約1074ℓ	約1377ℓ	約1673ℓ
外寸法(mm)	W600×D800×H1905	W750×D800×H1905	W900×D800×H1905	W1200×D800×H1905	W1500×D800×H1905	W1800×D800×H1905
扉	ステンレス鋼板・2枚		ステンレス鋼板・4枚			ステンレス鋼板・6枚
重量	約87kg	約96kg	約109kg	約129kg	約152kg	約191kg
圧縮機定格出力	400W	400W	400W	400W	400W	400W+300W
冷媒	R-290(HCノンフロン)	R-290(HCノンフロン)	R-290(HCノンフロン)	R-290(HCノンフロン)	R-290(HCノンフロン)	R-290(HCノンフロン)
電源	AC100V 50/60Hz 15A				3φ200V 50/60Hz 15A	
定格消費電力	207/207W	220/220W	233/233W	267/267W	294/294W	438/447W
価格	¥930,000	¥1,060,000	¥1,230,000	¥1,360,000	¥1,490,000	¥1,650,000

●仕様(冷凍冷蔵タイプ)

モデル	NDFR-700EHC	NDFR-1020EHC	NDFR-1320EHC	NDFR-1620EHC
冷却性能	F(冷凍室):-8℃~-25℃/R(冷蔵室):-7℃~+12℃			
内容積	F:約354ℓ, R:約354ℓ	F:約510ℓ, R:約510ℓ	F:約664ℓ, R:約664ℓ	F:約510ℓ, R:約1111ℓ
外寸法(mm)	W900×D800×H1905	W1200×D800×H1905	W1500×D800×H1905	W1800×D800×H1905
扉	ステンレス鋼板・4枚		ステンレス鋼板・6枚	
重量	約127kg	約150kg	約175kg	約195kg
圧縮機定格出力	F:320W, R:320W	F:400W, R:320W	F:400W, R:320W	F:400W, R:320W
冷媒	F:R-600a(HCノンフロン) R:R-600a(HCノンフロン)	F:R-290(HCノンフロン) R:R-600a(HCノンフロン)	F:R-290(HCノンフロン) R:R-600a(HCノンフロン)	F:R-290(HCノンフロン) R:R-600a(HCノンフロン)
電源	AC100V 50/60Hz 15A			
定格消費電力	216/216W	255/255W	255/255W	272/272W
価格	¥1,380,000	¥1,410,000	¥1,500,000	¥1,710,000

●仕様(冷蔵タイプ、ガラス扉)


モデル	NDRG-490EHC	NDRG-1080EHC	NDRG-1390EHC	NDRG-1690EHC
冷却性能	+0℃~+10℃			
内容積	約490ℓ	約1090ℓ	約1386ℓ	約1681ℓ
外寸法(mm)	W600×D800×H1905	W1200×D800×H1905	W1500×D800×H1905	W1800×D800×H1905
扉	Low-E 複層ガラス・2枚	Low-E 複層ガラス・4枚		Low-E 複層ガラス・6枚
重量	約98kg	約154kg	約195kg	約214kg
圧縮機定格出力	320W	320W	400W	400W
冷媒	R-600a(HCノンフロン)	R-600a(HCノンフロン)	R-290(HCノンフロン)	R-290(HCノンフロン)
電源	AC100V 50/60Hz 15A			3φ200V 50/60Hz 15A
定格消費電力	176/176W	176/176W	302/302W	302/302W
価格	¥1,130,000	¥1,250,000	¥1,450,000	¥1,570,000

注:2026年9月から価格が変更になりました。

インバータ制御による省エネタイプ

トリプルインバータ制御方式(圧縮機、庫内ファン、凝縮ファン)を採用。状況に応じた効率の良い運転で、省エネ・省コスト効果を発揮します。

■ムダな電力消費を抑えるインバータ制御

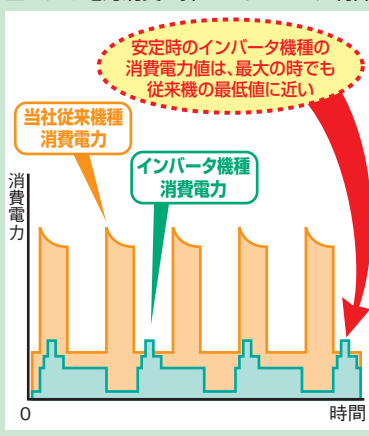

薬用冷凍冷蔵庫

ノンフロン製品

冷蔵室 +4℃ 常用+2℃～+14℃
(周囲温度30℃時)
冷凍室 -30℃ 常用-20℃～-30℃
(周囲温度30℃時)

MEDICAL REFRIGERATOR

一台二役(冷凍・冷蔵保管)、設置場所を取らないスリムタイプ。
試薬・医薬品・各種サンプルの長期保存用。

《特長》

- ① オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。
- ② 設置場所を取らないスリムタイプ(製品幅50cm)。
- ③ 冷蔵室と冷凍室で、それぞれ独立した冷却回路・制御回路を持ち、圧縮機も2台搭載。各室の影響を受けないような設計。
- ④ 充実した警報機能を標準装備(高温・低温警報、扉警報、外部警報出力)。

●仕様

モデル	NC-ME25S1HC
冷却性能	冷蔵室: +2℃～+14℃ / 冷凍室: -20℃～-30℃
内容積	冷蔵室: 約179ℓ / 冷凍室: 約85ℓ
外寸法(mm)	W500×D(650+85)×H1900
内寸法(mm)	冷蔵室: W420×D530×H870 冷凍室: W370×D515×H445
重量	約100kg
圧縮機定格出力	冷蔵室: 160W / 冷凍室: 170W
冷媒	冷蔵室: R-600a / 冷凍室: R-290 (HCノンフロン)
電源	AC100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	219 / 234W
価格	¥520,000



フロン排出抑制法対象外

NEW



NC-ME25S1HC

薬用冷蔵ショーケース

ノンフロン製品

+4℃ 常用+2℃～+14℃
(周囲温度30℃時)

MEDICAL REFRIGERATOR

安定した温度管理で、薬品の保存に最適な専用保冷库。

《特長》

- ① オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。
- ② 冷氣循環方式で庫内温度を均一に維持。
- ③ 自動霜取り方式を採用。
- ④ 高温・低温警報、外部警報出力端子を標準装備。
- ⑤ NC-ME50ECHC/50RECHC/100ECHC/100RECHCは、インバータ制御方式を採用した省エネタイプ。



NC-ME50RECHCとNC-ME100RECHCは収納性に優れたスライドラック仕様。

向かって右側半分がスライドラック仕様になっています



フロン排出抑制法対象外



NC-ME18HC



NC-ME15HC



NC-ME31HC



NC-ME50ECHC



NC-ME100ECHC

●仕様

モデル	NC-ME18HC	NC-ME15HC	NC-ME31HC	NC-ME50ECHC[NC-ME50RECHC]	NC-ME100ECHC[NC-ME100RECHC]
冷却性能	+2℃～+14℃				
内容積	約211ℓ	約157ℓ	約350ℓ	約570ℓ	約1239ℓ
外寸法(mm)	W800×D(450+35)×H1360	W400×D(500+35)×H1900	W800×D(450+35)×H1900	W900×D(600+26)×H1865	W1800×D(600+26)×H1865
内寸法(mm)	W708×D339×H875	W320×D360×H1200	W708×D339×H1415	W808×D488×H1447	W1708×D488×H1447
重量	約70kg	約68kg	約91kg	約118kg [132kg]	約195kg [219kg]
圧縮機定格出力	160W	160W	160W	320W(インバータ)	320W(インバータ)
冷媒	R-600a(HC ノンフロン)				
電源	AC100V 50/60Hz 15A				
定格消費電力	117 / 124W	113 / 121W	124 / 129W	150 / 150W	202 / 202W
価格	¥410,000	¥330,000	¥470,000	¥800,000 [¥900,000]	¥1,270,000 [¥1,420,000]

注1: [] 書きはスライドラック仕様、詳細は単品カタログ参照。 注2: 2026年9月から価格が変更になりました。

防爆冷蔵庫・防爆冷凍庫

-20℃~+10℃
(周囲温度30℃時)

EXPLOSION-PROOF FREEZER-REFRIGERATOR

有機溶媒等の可燃性物質を冷凍・冷蔵貯蔵。

〈厚生労働省規格〉日本の(社)産業安全技術協会検定合格品

防爆性能fd2G4

防爆性能Expxed [ia] IIBT4X



EP-570



EP-180



EP-400

《特長》

- ①危険場所のうち、1種場所と2種場所で使用が可能。
- ②庫内には、電気火花を発生する部分はなく、庫外でも、電気火花を発生する部分はすべて防爆化。
- ③冷媒回路は内圧防爆構造、制御回路は耐圧防爆構造。
- ④EP-570は、デジタル温度調節器、ノンフロン冷媒を採用。
- ⑤温度警報、外部警報用端子を標準で装備。
- ⑥本体の移動や固定に便利なキャスター・アジャストボルト付き。

注：水性ガス・水素・アセチレン・二硫化炭素などのガスを発生するもの、及び自己反応性物質の貯蔵のためや、前記のガスの状況下では絶対に使用しないでください。

●仕様

モデル	EP-180	EP-400	EP-570 (販売中止)
検 定 番 号	第T51549号	第T51548号	第TC20841号
防 爆 性 能	fd2G4		Expxed [ia] IIBT4X
冷 却 性 能	0℃~+10℃		-20℃~+10℃
内 容 積	約185ℓ	約403ℓ	約579ℓ
外 寸 法 (mm)	W610×D(615+40)×H1320	W750×D(665+40)×H1750	W850×D(900+120)×H1890
内 寸 法 (mm)	W510×D455×H800	W650×D505×H1230	W710×D680×H1200
重 量	約110kg	約150kg	約200kg
圧縮機定格出力	175W	175W	280W
冷 媒	R-134a (HFC)		R-600a (HCノンフロン)+R-290 (HCノンフロン)
電 源	AC100V 50/60Hz 15A 電源コード:3PNCT2sq3芯3m丸端子M4 (注:プラグ無し)		
定格消費電力	255/280W	275/290W	220/210W
温 度 警 報	+15℃以上が2時間連続した時、赤ランプ点灯		ブザー報知、ランプ点灯 (設定温度に対する偏差方式)
価 格	¥850,000	¥1,100,000	¥1,860,000

注1：出荷時には、暫定的に起動確認用のプラグが取り付けられていますが、防爆プラグではありません。実際にご利用いただく際には、必ず使用条件に適したプラグに付け替えてください。

注2：EP-570の後継機EP-571は現在防爆検定中で2026年10~11月頃に販売開始予定。

リーペル庫内防爆冷凍庫・冷蔵庫・冷凍冷蔵庫

ノンフロン製品

冷凍庫 -9℃~-26℃
冷蔵庫 +2℃~+16℃
冷凍冷蔵庫 +4℃/-30℃

EXPLOSION-PROOF FREEZER-REFRIGERATOR

実験室・研究室における可燃性ガス・液体の少量保管用、
庫内防爆冷蔵庫/冷凍冷蔵庫。

《特長》

- ① オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。
- ② 庫内には、貯蔵物から可燃ガスが発生しても、電気火花またはアークが発生する部分はありません。(庫内防爆仕様)
- ③ 充実した警報機能を標準装備(温度上下限警報、扉警報、外部警報出力)。LKEXVを除く。
- ④ 欧州のATEX指令に基づき、『安全増防爆構造』として認定された製品。

注1:本製品は庫内防爆仕様のため、非危険場所でご使用ください。

注2:日本国内の防爆検定には合格しておりません。

●仕様

モデル	LGUEX-1500	LKEXV-1800	SRF-FG-5501	SCF-FG-4002
冷却性能	-9℃~-26℃	+2℃~+15℃	+3℃~+16℃	冷蔵室:+3℃~+16℃ 冷凍室:-9℃~-30℃
内容積	約139ℓ	約180ℓ	約558ℓ	冷蔵室:約267ℓ/冷凍室:約110ℓ
外寸法(mm)	W600×D(614+47)×H820	W600×D(595+43)×H860	W750×D(765+43)×H1684	W600×D(650+43)×H2044
内寸法(mm)	W470×D467×H663	W513×D441×H704	W605×D607×H1463	冷蔵室:W460×D492×H1066 冷凍室:W426×D474×H614
重量	約42kg	約40kg	約82kg	約83kg
圧縮機定格出力	125W	90W	80W	190W(インバータ)
冷媒	R-600a(HC ノンフロン)			
電源	AC100V 50/60Hz 15A			
定格消費電力	80/80W	100/100W	80/90W	100/100W
価格	¥360,000	¥260,000	¥570,000	¥580,000



LGUEX-1500



LKEXV-1800



SRF-FG-5501



SCF-FG-4002



フロン排出抑制法
対象外

RoHS対応

ユニット式大型防爆冷蔵庫

EXPLOSION-PROOF REFRIGERATOR (UNIT TYPE)

有機溶媒等の可燃性物質を冷凍・冷蔵貯蔵。
冷却ユニット方式の大型タイプ(1000ℓ~3000ℓ)。
日本国内の防爆検定合格品、デジタル式。

《特長》

- ① 危険場所のうち、1種場所と2種場所で使用可能。
- ② 庫内には電気火花が発生する部分はなく、庫外でも電気火花が発生する部分はすべて防爆化。
- ③ 冷媒回路は内圧防爆構造、制御回路は耐圧防爆構造・本質安全防爆構造。
- ④ デジタル設定/デジタル表示。
- ⑤ 冷却ユニット方式のため寸法のカスタマイズも可能。
- ⑥ 高温・低温警報、機器異常警報(冷媒回路、冷凍機異常)、外部警報出力端子、伝送出力、漏電遮断器を標準装備。
- ⑦ 扉には、閉じ込め防止用として、扉ストッパー、安全押棒を標準装備。

●仕様

モデル	EPUT-A1-F1000	EPUT-A1-F1500	EPUT-B1-R3000
冷却性能	-20℃~+10℃	-20℃~+10℃	+0℃~+10℃
内容積	約1028ℓ	約1583ℓ	約3008ℓ
外寸法(mm)	W1204×D(1016+84)×H1984	W1844×D(1016+84)×H1894	W3154×D(1066+84)×H1994
内寸法(mm)	W1040×D800×H1320	W1680×D800×H1230	W2990×D850×H1230
重量	約380kg	約430kg	約720kg
圧縮機定格出力	750W	750W	1500W
冷媒	R-404A(HFC)		
電源	3φ200V 50/60Hz 20A		
定格消費電力	800/880W	800/880W	1360/1240W

注:上記以外にもラインナップを取り揃えております。詳細は単品カタログをご参照ください。

-20℃~+10℃
(周囲温度30℃時)



EPUT-A1-F1000



EPUT-A1-F1500



EPUT-B1-R3000

クロマトチャンバー

+4°C 常用+3°C~+26°C
(周囲温度5°C~30°C時)

CHROMATOGRAPHY CHAMBER

インバータ制御による省エネタイプ。クロマトに必要な設備をチャンバー内に装備。



MC-8EC



MC-20EC



MC-30EC

《特 長》

- ①インバータ制御方式(圧縮機)による省エネタイプ。
- ②扉は庫内の視認性が高いワイドガラスタイプ。
- ③ワイドな使用温度範囲(+3°C~+26°C)。様々な実験及びサンプル保管が可能。
- ④圧縮機のインバータ制御と加熱ヒーターの併用により、均一な庫内温度分布を実現(±2°C)。
- ⑤クロマトに必要な電源コンセント、アクセスポート、カラム棒等を装備。
- ⑥温度警報(高温・低温)、ドア警報、外部警報出力端子、漏電遮断器、鍵を標準装備。

●仕様

モ デ ル	MC-8EC	MC-20EC	MC-30EC
冷 却 性 能	+3°C~+26°C		
内 容 積	約749ℓ	約1090ℓ	約1702ℓ
外 寸 法 (mm)	W(900+40)×D(800+37)×H1925	W(1200+40)×D(800+52)×H1925	W(1800+40)×D(800+52)×H1925
内 寸 法 (mm)	W798×D650×H1428	W1098×D650×H1428	W1698×D650×H1428
重 量	約125kg	約160kg	約220kg
圧縮機定格出力	300W(インバータ)		
冷 媒	R-134a(HFC)		
主 電 源	AC100V 50/60Hz 15A		
補 助 電 源 ^注	—	AC100V 50/60Hz 15A	
庫内コンセント	2口コンセント×1箇所	2口コンセント×2箇所	
定格消費電力	187/187W	208/208W	232/232W
価 格	¥1,020,000	¥1,280,000	¥1,450,000

注1:補助電源とは、庫内コンセント及び霜取排水用の自動蒸発ユニットの供給電源です。MC-8ECでは、庫内コンセントの電源は主電源からの供給となり、蒸発ユニットは別電源となります。

注2:2026年9月から価格が変更になりました。

メディカルチャンバー

+4°C 常用+3°C~+26°C
(周囲温度5°C~30°C時)

MEDICAL CHAMBER

インバータ制御による省エネタイプ。
ワイドな使用温度範囲と優れた庫内温度分布を実現。

《特 長》

- ①インバータ制御方式(圧縮機)による省エネタイプ。
- ②扉は庫内の視認性が高いワイドガラスタイプ。
- ③ワイドな使用温度範囲(+3°C~+26°C)。様々なサンプル保管が可能。
- ④圧縮機のインバータ制御と加熱ヒーターの併用により、均一な庫内温度分布を実現(±2°C)。
- ⑤温度警報(高温・低温)、ドア警報、外部警報出力端子、漏電遮断器、鍵を標準装備。

●仕様

モ デ ル	A-750EC
冷 却 性 能	+3°C~+26°C
内 容 積	約749ℓ
外 寸 法 (mm)	W(900+40)×D(800+37)×H1925
内 寸 法 (mm)	W798×D650×H1428
重 量	約125kg
圧縮機定格出力	300W(インバータ)
冷 媒	R-134a(HFC)
電 源	AC100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	187/187W
価 格	¥960,000

注:2026年9月から価格が変更になりました。



A-750EC

インキュベーター(冷凍機付き)

-10℃~+50℃
(周囲温度35℃時)

INCUBATOR

3ステップのプログラム運転機能で微生物培養などに幅広く対応可能。

《特長》

- ①-10℃~+50℃までの幅広い温度域で、目的に応じた低温・高温環境を創出。
- ②プログラム機能を内蔵。温度と時間を最大3種類組み合わせ可能。
- ③自動警報設定機能付き。プログラム運転中でも自動的に警報温度を設定。(設定温度±3℃以上で報知)
- ④庫内で試験・実験機器(シューカー、振とう器、攪拌機等)が使用可能。本体の左側面上部(庫外)に差し込みコンセントを設置。
- ⑤LAシリーズは、庫内の照明を15分ごとにON/OFF設定が可能。

●仕様

モ デ ル	NRB-14A	NRB-14LA	NRB-32A	NRB-32LA	NRB-41A	NRB-41LA
温度調節範囲	-10℃～+50℃(無試料時)					
内 容 積	約130ℓ		約287ℓ		約411ℓ	
外 寸 法 (mm)	W700×D(510+60)×H1090		W700×D(510+60)×H1800		W700×D(660+60)×H1800	
重 量	約75kg		約115kg		約130kg	
圧縮機定格出力	200W		200W		200W	
冷 媒	R-134a(HFC)					
照明ON/OFF設定	—	あり	—	あり	—	あり
電 源	AC100V 50/60Hz 15A					
定格消費電力	220／244W		237／252W		237／252W	
価 格	¥490,000	¥700,000	¥700,000	¥920,000	¥960,000	¥1,180,000

注:2026年9月から価格が変更になりました。



NRB-14A



NRB-41A

プレハブ低温・恒温室

PREFAB COLD ROOM

組立・移設・増設も思いのまま、フリープランに
応えられるプレハブ低温室・恒温室。

冷凍庫 -10℃~-30℃
低温室 -5℃~+15℃
恒温室 +20℃~+60℃

《特長》

- ①建物やスペースに合わせた冷凍・低温・恒温の各室が簡単に造れ、組立て式なので、分解・移設・増設も可能。
- ②室内の高さは1900~7800mmまで自由に選択が可能。
- ③断熱材には保温性、保冷性に優れた硬質ウレタンフォームを使用。
- ④優れた経済性の省エネタイプ。
- ⑤床仕様も標準床パネルの他、重荷重用、防熱コンクリート仕上げ等、各種のご要望に対応。

クリーンルームまたは、防爆仕様等の特別仕様にも対応致します。
お気軽にご相談下さい。



●機種およびスペース

冷凍室 (-20℃) -10℃~-30℃ 調節可	PF-0.5 (0.5坪)	PF-1 (1坪)	PF-2 (2坪)	PF-3 (3坪)	PF-4 (4坪)
低温室 [5℃] -5℃~+15℃ 調節可	PR-0.5 (0.5坪)	PR-1 (1坪)	PR-2 (2坪)	PR-3 (3坪)	PR-4 (4坪)
恒温室 (+20℃~+60℃)	—	—	PE-2 (2坪)	PE-3 (3坪)	PE-4 (4坪)

●標準寸法表

PR、PE、PF共通			PR、PE(断熱厚42mm)					PF(断熱厚100mm)				
坪数	m ²	巾(mm)×奥行(mm)	巾(mm)×奥行(mm)	高さ (mm)	室内 容積 (m ³)	冷凍機 (kW)	巾(mm)×奥行(mm)	高さ (mm)	室内 容積 (m ³)	冷凍機 (kW)		
		外寸法	内寸法	外寸法	内寸法		外寸法	内寸法				
0.5	1.62	900×1800	816×1716	2348	3.08	0.6 0.75 1.5	700×1600	2464	2.46	1.1 1.5 2.2		
1.0	3.24	1800×1800	1716×1716	2348	6.48		1600×1600	2464	5.63			
1.5	4.86	1800×2700	1716×2616	2348	9.88		1600×2500	2464	8.80			
2.0	6.48	3600×1800	3516×1716	2348	13.27	1.5 2.2	3400×1600	2464	11.97	2.2 3.0		
2.5	8.10	4500×1800	4416×1716	2348	16.67		4300×1600	2464	15.14			
3.0	9.72	5400×1800	5316×1716	2348	20.07		5200×1600	2464	18.30			
3.0	9.72	3600×2700	3516×2616	2348	20.24	1.5 2.2	3400×2500	2464	18.70	2.2 3.0		
3.5	11.34	6300×1800	6216×1716	2348	23.47		6100×1600	2464	21.47			
4.0	12.96	3600×3600	3516×3516	2348	27.20		3400×3400	2464	25.43			
4.0	12.96	7200×1800	7116×1716	2348	26.86	2.2	7000×1600	2464	24.64			

注:PEはヒーター仕様になります。

ホシザキ製氷機

(製氷能力)
19kg~300kg

ICE MAKER

キューブ、フレーク、チップアイスラインナップ。
使用目的に合わせて、お選び下さい。



IM-20CM



FM-120K-50



CM-300AK-SA

《特 長》

- ①IM-20CMは、コンパクトな卓上タイプ。
- ②FM-120K-50は、高さが低いアンダーカウンタータイプ。
- ③CM-300AK-SAは、スリムなタテ型、省スペースタイプ。

掲載機種以外にも各種製氷機を取り揃えています。
お気軽にご相談下さい。

●仕様

モ デ ル	IM-20CM	FM-120K-50	CM-300AK-SA
氷 の 形 状	キューブアイス	フレークアイス	チップアイス
製氷能力/日	約19/20kg	約105/115kg	約280/300kg
貯 氷 量	約9kg	約46kg	約145kg
凝 縮 器	フィン&チューブ形強制空冷式		
外 寸 法(mm)	W450×D450×H630	W900×D600×H800	W700×D790×H1790
重 量	約34kg	約84kg	約121kg
圧縮機定格出力	85W	300W	600W
冷 媒	R-134a(HFC)	R-134a(HFC)	R-404A(HFC)
定格消費電力	190/210W	482/493W	865/1035W
電 源	AC100V 50/60Hz 15A		3φ200V 50/60Hz 15A

注:給排水工事が必要です。工事費は別途申し受けます。

液体窒素保存容器(エアリキッド社製)

CRYOBIOLOGICAL CONTAINERS


高性能、高能率のアルミ保存容器。液体窒素の蒸発によるロスが少ない。
生物学、生理学、免疫学、獣医学等のあらゆる分野の凍結保存に役立ちます。

GTシリーズ

掲載機種以外にも
各種液体窒素保存容器を
揃えています。



キャニスター
(GT 7.9.11.21.35対応)

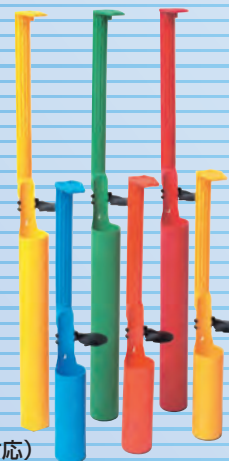

●仕様

GTシリーズ モ デ ル	少蒸発タイプ				多量保存タイプ		
容 量 (ℓ)	GT 9	GT 11	GT 21	GT 35	GT 26	GT 38	GT 40
空 重 量 (kg)	9.3	12.2	21.5	33.6	26.7	37	40
充 填 重 量 (kg)	8.2	9.2	13	15	14.8	19	24
口 径 (mm)	15.7	19	30.4	43	36	49	57
全 高 (mm)	50	50	50	50	80	80	120
外 径 (mm)	450	630	660	660	460	715	710
蒸 発 量 (ℓ/day)	358	308	388	468	468	468	468
保 持 日 数 (day)	0.11	0.09	0.09	0.09	0.29	0.15	0.29
再 充 填 期 間 (day)	84	130	225	350	90	245	140
再 充 填 期 間 (day)	50	80	140	219	56	153	88
キャニスター数 (本)	6	6	6	6	9	6	10
0.5mlストロー収納本数	720	1440	1440	1440	3285	4380	7300
2mlアンプル収納本数	-	180	180	180	-	612	1200
キャニスター種類	6色プラスチック製キャニスター使用				ステンレス製キャニスター使用		
価 格	¥250,000	¥254,000	¥306,000	¥358,000	¥435,000	¥420,000	¥504,000

GTシリーズ モ デ ル	小型タイプ GT 3
容 量 (ℓ)	40
空 重 量 (kg)	3.7
充 填 重 量 (kg)	4.5
口 径 (mm)	7.5
全 高 (mm)	50
外 径 (mm)	405
蒸 発 量 (ℓ/day)	248
保 持 日 数 (day)	0.11
再 充 填 期 間 (day)	33
再 充 填 期 間 (day)	21
キャニスター数 (本)	6
キャニスター径 (mm)	38
キャニスターの高さ	120
0.25mlストロー収納本数	1560
0.5mlアンプル収納本数	720
価 格	¥217,000

注:キャニスターは標準装備となります。

ポータブルフリーザー (AC/DC電源対応)

ノンフロン製品

PORTABLE FREEZER

最新型冷凍機(スターリングクーラー)の採用により、
省エネ、軽量、コンパクト化を実現。

《特長》

- ①場所を取らないコンパクト設計。小型の冷蔵庫・冷凍庫として使用可能
(AC電源対応)。サンプル保管等のパーソナル用として便利。
- ②DC12V電源にも対応しており、サンプル等の車による移動用としても利用可能。
- ③オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒(ヘリウム)を採用。
- ④南京錠用掛け金具付き(南京錠は付属していません)

モデル	SC-DF25K
冷却性能	+10℃～-40℃(1℃単位) 注:周囲温度+25℃時
内容積	約25ℓ
外寸法(mm)	W695×D350×H460
内寸法(mm)	W335×D225×H340
材質	本体:PP、庫内側壁:アルミニウム
断熱材	発泡ウレタン+真空断熱パネル
重量	約15.4kg
冷媒	ヘリウム(ノンフロン)
電源	DC12V(車用)、AC100V
定格消費電力	48W
付属品	ACアダプター、DCカーコード
価格	¥280,000



SC-DF25K

《オプション》



バスケット
¥1,000/個(本体には2個収納可能)

バイセル 凍結処理容器

BIO FREEZING VESSEL

少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と
再現性を実現した、動物細胞凍結処理容器。

《特長》

- ①プログラムフリーザーを使わずに細胞の緩速凍結が可能。
- ②実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について
高い生存率と再現性が確認済み。
- ③使用方法是簡単。調整済み細胞入りチューブをBICELLに入れ、
その後-80℃の中に静置。その後約3時間後に凍結完了。
(参考プロトコルあり)

●仕様

モデル	BICELL
耐熱範囲	-80℃～+40℃
外寸法(mm)	φ88×H109(蓋含む)
内寸法(mm)	φ50×H69
重量	約190～200g
緩助剤	約100mℓ
チューブ本数	セラムチューブ(1.8～2mℓ)約7～8本 / ガラスアンプル(1mℓ)約9～10本
価格	¥20,000(1セット6個入り)

-80℃～+40℃




BICELL

バリデーションサービス


GMP/GLPに対応した品質保証をサポートするために、日本フリーザーではバリデーションサービスを実施しています。専門知識を有する技術員が、製品の基本機能の検査に加え、庫内温度分布・精度についても検証いたします。検査の詳細な内容は、お客様との打ち合わせによって決定いたします。バリデーション終了後には、以下のような書類をとりまとめ、ご提出いたします。

<提出書類のイメージ>

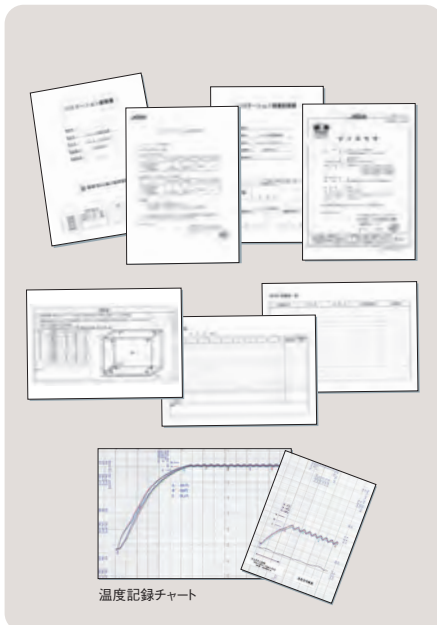

注:料金については、別途お問い合わせください。


バリデーション実施の流れ

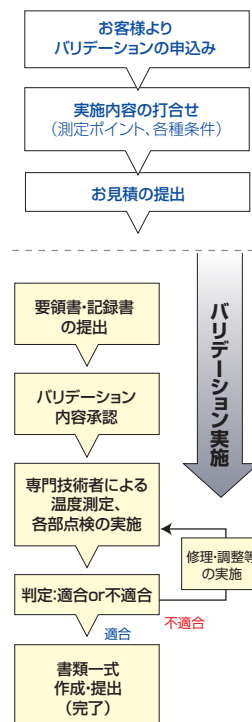

集中温度管理システム

ペーパーレスレコーダを用いた温度管理で、離れた場所でも機器の異常状態をリアルタイムで感知します。

- 超低温槽、フリーザー、保冷库等の複数台の機器の温度データを常時モニタリングすることが可能です。(一元管理)
- 温度上昇等の異常発生時には、パソコンや携帯電話へメール送信が可能です。
- 温度データは、電子データとして保存可能なため、データ解析、グラフの作成等が可能です。また、オプションのソフトで日報、週報および月報の作成が可能です。
- 別途ソフトやゲートウェイを利用し、クラウド管理することも可能です。

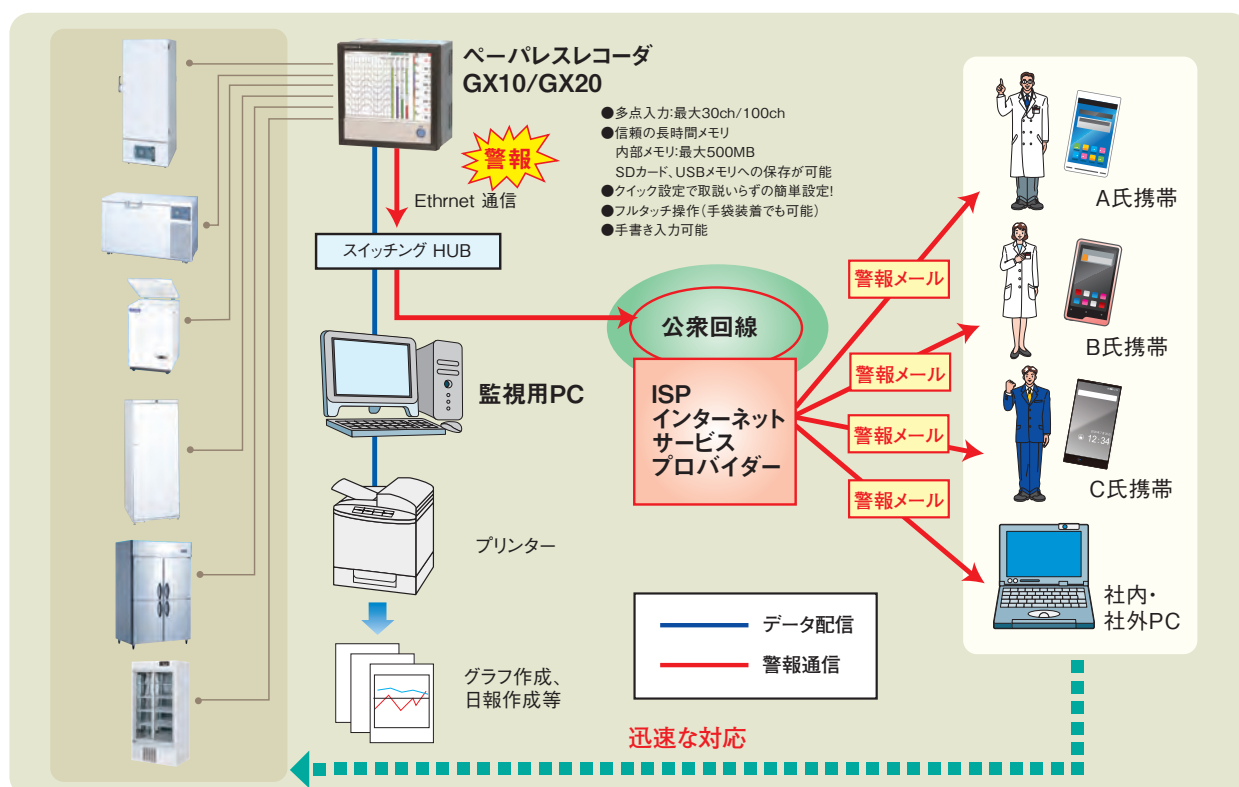

注:価格については、監視機器の台数や設置条件等により異なりますので、別途お問い合わせください。

温度記録計

●温度ロガー（TRシリーズ）

サーモレコーダー（モデル:TR-55i-Pt）

- ①測定温度範囲: -199℃～600℃
 - ②チャンネル数: 1チャンネル
 - ③記録間隔: 1秒～60分 選択可能(15通り)
 - ④記録数: 16,000個
(間隔1分で約267時間、約11日間)
 - ⑤記録方式: ワンタイム方式、エンドレス方式を
選択可能
 - ⑥表示方法: 液晶表示
 - ⑦電池: リチウム電池LS14250(CR2も使用可)
 - ⑧サイズ: W47×D19×H62mm
- 《付属品》 Ptモジュール(PTM-3010)、リチウム電池(LS14250)

価格 ¥63,000

注1: 価格にはセンサー(Pt100Ω)及びセンサー取付工賃を含みます。
注2: 測定したデータを読み取るためには、別途コミュニケーションポート(TR-50U2)が必要となります。


コミュニケーションポート（データ読み取り機／モデル:TR-50U2）

サーモレコーダーのデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うためのコミュニケーションポートです。付属の管理ソフトでデータのグラフ化、表作成、テキストファイル化などが可能です。

- ①通信: USB、光通信
 - ②電源: USBバスパワー(PC電源)
 - ③サイズ: W56×D16.5×H80mm
- 《付属品》 USB通信ケーブル(US-15C)、管理ソフト(CD-ROM)

価格 ¥15,000

注1: コミュニケーションポート1台で複数のサーモレコーダーの読み取りが可能です。

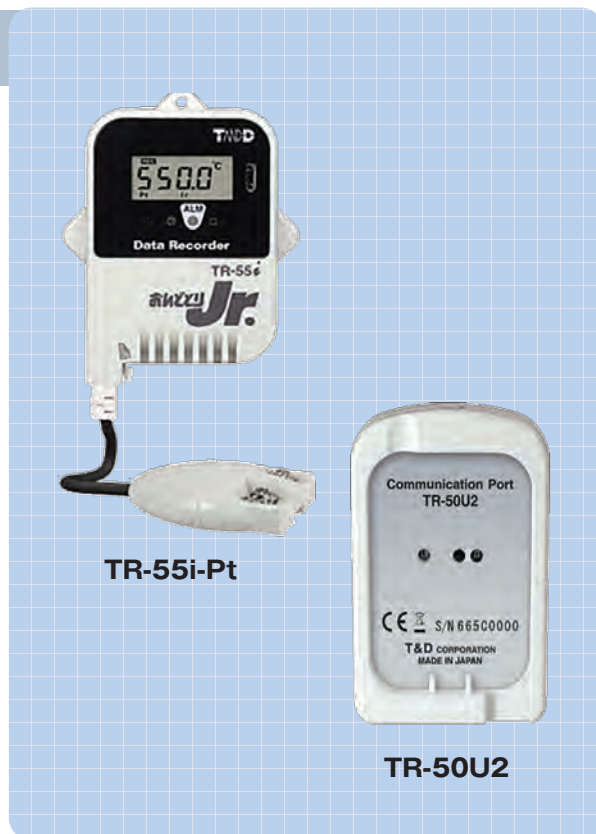

TR-55i-Pt

TR-50U2

●温度ロガー（KTシリーズ）

超低温フリーザーや冷蔵庫の庫内に、ロガーごと設置が可能！

- ①本体内部のセンサーによって温度を検知・記録。ロガーごと庫内に設置が可能。
- ②記録データは、付属のソフト(対応OS:Windows7以上)とNFC通信でPCへ取り込み、
グラフ表示、レポート作成等が可能。
- ③記録間隔: 1～255分間隔、記録容量: 16,000件
- ④温度ロガーサイズ: H34×W90×D15mm
- ⑤電池寿命はKT-155F/EX(LED)が約100日、KT-155Fが約3年。



庫内に入れて利用が可能▶

ロガー本体	型番:KT-155F/EX(LED) 価格:¥25,800	型番:KT-155F 価格:¥10,800
測定温度範囲	-80℃～+80℃	-40℃～+80℃
取付用アタッチメント	型番:AT-150S, 価格:¥1,500	
NFC通信読み取りリーダー	型番:RC-S380S, 価格:¥5,300	
専用電池(予備付属)	型番:ER2450TWL, 価格:¥6,000(2個セット)	-(市販品 CR2477)
合計標準価格	¥38,600(上記4点セット)	¥17,600(上記3点セット)

※電池については、上記2機種ともに1個はロガー本体内部に付属されています。

温度記録計

●横河電機製 温度記録計

《主な仕様》

- 入力点数: $\mu R10000$: 1, 2, 3, 4ペン, 6打点
 $\mu R20000$: 1, 2, 3, 4ペン, 6, 12, 18, 24打点
- 入力種類: 直流電圧、熱電対、測温抵抗体、動作記録、直流電流(外部シャント抵抗付加)
- 警報種類: 上下限、ディレイ上下限、差上下限、変化率、上昇/下降限
- 付加仕様: 警報出力、RS-422、Ethernetインタフェース、演算機能、リモート制御、ヘッダー印字等
- 外形寸法: $\mu R10000$: 144(W)×144(H)×220(D)mm
 $\mu R20000$: 288(W)×288(H)×220(D)mm
- 質量: $\mu R10000$: 約2.1~2.5kg、 $\mu R20000$: 約7.5~9.0kg

《製品の特長》

高信頼・高品質・優れた操作性を最新技術で実現。
さらにネットワーク機能などお客様の多様なニーズに応える多機能を装備した
横幅100、180mmの記録紙を用いる最新の工業用レコーダです。

●高信頼・高品質を最新技術で実現

- ・非接触技術を駆使
- ・駆動部を高精度加工技術により小型化・カスタムICによる高集積化
- ・防塵防滴全面ドア (IP54準拠)

●優れた操作性の実現

- ・フルドットマトリックスディスプレイ採用
($\mu R10000$: 101×16、 $\mu R20000$: 181×16)
- ・ナビゲーション表示による対話式設定
- ・記録中の記録紙取り出し機能装備
- ・器内照明を標準装備
(高輝度型白色LEDを採用)




モデル: $\mu R-10000$



モデル: $\mu R-20000$

注: 価格については、別途お問い合わせください。

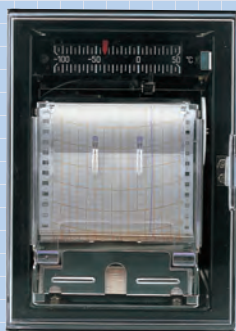

モデル: LMMC-1

●2ヶ月用温度記録計

- ①1ペン式
- ②サイズ: W110×D166×H154mm
- ③センサー: 液体膨張式
- ④リード線・感温部: SUS304
- ⑤電源: DC1.5V(単2乾電池1本)
- ⑥記録用紙: 折りたたみ式
幅73mm×長さ4.2m(記録幅60mm)
- ⑦記録紙送り速度: 2.5mm/h

- ⑧記録日数: 60日間(2ヶ月)
- ⑨記録用ペン: カートリッジペン(紫)
- ⑩警報接点付
(警報設定温度範囲: -80℃~-20℃)

本体価格 **¥228,000**(記録紙1箱・1年分付)
記録紙(型式: 2L-10040) **¥14,000**(1箱・1年分)
注: 取付工賃は別途発生します。

●自記温度記録計

- ①1ペン式連続自動記録
- ②サイズ: W149×D103×H174mm
- ③センサー: ガス膨張式
- ④電源: DC1.5V(単2乾電池1本)
- ⑤記録用紙: 感圧紙、インキ不要。
(初回、12冊1年分付)
- ⑥上下限警報用接点内蔵(要AC電源)

モデル: AKM-4014: 本体価格**¥136,000**
(記録範囲: -40℃~+14℃)

モデル: AKM-0620: 本体価格**¥136,000**
(記録範囲: -6℃~+20℃)

記録紙価格 **¥10,000**(12冊1年分)
型式: BKM-4044(AKM-4014用)
型式: BKM-0620(AKM-0620用)

注: 取付工賃は別途発生します。



モデル: AKM-4014/AKM-0620



モデル: SR10006

●SR温度記録計

- ①大型LED(10×18mm)で鮮明表示、各種設定は簡単な対話式。
- ②防塵防滴前面ドア(IP54準拠)。
- ③定刻印字、ゾーン記録、部分圧縮拡大等、各種機能を装備。警報接点(オプション)。

《主な仕様》

- ・6打点式(6色ワイヤドット) ・外形寸法: W144×H144×D220mm 質量: 2.5kg
- ・センサー: 白金測温抵抗体Pt-100Ω ・記録紙送り速度: 10~1500mm/h(28段階)
- ・有効記録幅: 100mm 記録紙長: 16m(折りたたみ式)
- ・電源電圧: 100~240VAC(周波数切替不要)

本体価格 **¥250,000**(記録紙1箱・2ヶ月分付) 記録紙 **¥20,000**(6箱1組・1年分)

注1: 価格にはセンサー1本が含まれています。追加分についてはお問合せください。

注2: 取付工賃は、別途発生します。

●ペーパレスレコーダ

- ①5.7型高精度・広視野角TFTカラー液晶ディスプレイ
- ②トレンド、デジタル、オーバビューなどの画面表示
- ③インターネットを介して、本体の表示画面をPCで表示
- ④入力種類:DCV、TC、RTD、DI
- ⑤測定周期:最短1s、または125ms
- ⑥チャンネル:2ch、4ch、6ch、8ch、10ch、12ch
- ⑦大容量内部メモリ400MB
- ⑧最大32GBのSDカードまたは最大32GBのCFカードに対応
- ⑨省スペース設計、IP65防水防塵規格に対応
- ⑩定格電源電圧:100～240VAC(自動切換)
- ⑪外寸法:W162×H162×D184mm

注:価格については、別途お問い合わせ下さい。



モデル:FX1000シリーズ

鍵の取付

オプションで鍵の取付が可能です。製品の出荷前にご依頼ください。

サイドハンドル錠(モデル:A-458-R)

価格 ¥17,000/1箇所

(対象機種:GS-1376HC, GX-823HC, KX-1021HC)

注:通常は1パターンの鍵になります。複数台購入時等で鍵違いをご希望の際は、お問合せください。鍵違いの場合は、2箇所目から¥22,000/1箇所になります。



その他

- ・製品を固定する為の設置固定金具の取付等、対応いたします。
お気軽にご相談ください。
- ・製品をクリーンルームへ搬入・設置する為のクリーン梱包・清掃に対応いたします。
お気軽にご相談ください。

●主な許可・届出

◆建設業許可

- ・許可を受けた建設業:電気工事業、管工事業
- ・許可番号:東京都知事
許可 第124957号

◆登録電気工事業者届

- ・届出番号:東京都知事届出 第177458号
- ・電気工事の種類:一般用電気工作物・自家用電気工作物

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



日本フリーザーはSDGsを支援します



保証について

製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、
保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。
 (但しバイセルは消耗品のため、保証書は付いておりません。)

こちらから総合カタログおよび各種
 単品カタログがダウンロード可能です。

⚠ 安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
- アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものは、防爆製品に保管してください。
 防爆製品以外に保管しますと爆発する危険があります。



発売元

日本フリーザー株式会社

販売店

本 社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL.(03) 3831-7643 FAX.(03) 3832-0633
 大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目15番31号 TEL.(06) 6337-0600 FAX.(06) 6369-2166
 茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL.(029) 855-1181 FAX.(029) 855-0888
 名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市中東区西山本通2丁目2番地 TEL.(052) 788-7770 FAX.(052) 788-7771
 神奈川営業所 〒251-0021 神奈川県藤沢市舘沼神門2丁目1-2神明商事ビル3階 TEL.(0466) 29-0701 FAX.(0466) 29-0702
 埼玉工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL.(048) 933-2755 FAX.(048) 936-2228

- 仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
- 梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
- カタログの記載内容は2026年9月現在のものです。