

保冷库(冷凍冷蔵庫)仕様

モデル	NDFR-700ECHC	NDFR-1020ECHC	NDFR-1320ECHC	NDFR-1620ECHC
冷却性能	F(冷凍室):-8℃~-25℃／R(冷蔵室):-7℃~+12℃			
内容積	F:約354ℓ、R:約354ℓ	F:約510ℓ、R:約510ℓ	F:約664ℓ、R:約664ℓ	F:約510ℓ、R:約1111ℓ
外寸法 (mm)	W900×D800×H1905	W1200×D800×H1905	W1500×D800×H1905	W1800×D800×H1905
内寸法 (mm)	F:W374×D650×H1428 R:W374×D650×H1428	F:W524×D650×H1428 R:W524×D650×H1428	F:W674×D650×H1428 R:W674×D650×H1428	F:W524×D650×H1428 R:W1124×D650×H1428
外装	ステンレス鋼板(SUS430)・亜鉛引鋼板			
内装	ステンレス鋼板(SUS430)			
断熱材	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン			
扉	ステンレス鋼板(SUS430)・4枚			ステンレス鋼板(SUS430)・6枚
棚	PEコーティング網棚(F3枚・R3枚)	PEコーティング網棚(F3枚・R3枚)	PEコーティング網棚(F3枚・R3枚)	PEコーティング網棚(F3枚・R6枚)
棚耐荷重	55kg／枚	75kg／枚	F:75kg／枚、R:55kg／枚	75kg／枚
圧縮機	320W(インバータ)×2	F:400W(インバータ) R:320W(インバータ)	F:400W(インバータ) R:320W(インバータ)	F:400W(インバータ) R:320W(インバータ)
冷却器／凝縮器	フィンチューブ／フィンチューブ			
冷媒 (量)	R-600a(HCノンフロン)75g×2	F:R-290(HCノンフロン)100g R:R-600a(HCノンフロン)90g	F:R-290(HCノンフロン)100g R:R-600a(HCノンフロン)90g	F:R-290(HCノンフロン)100g R:R-600a(HCノンフロン)90g
除霜方式	ヒーターデフロスト			
電源 (50/60Hz)	AC100V 15A単独			
定格電流	3.0／3.0A	3.4／3.4A	3.5／3.5A	3.5／3.5A
定格消費電力	216／216W	255／255W	255／255W	272／272W
冷却時消費電力	275／275W	325／325W	333／333W	369／369W
霜取時消費電力	551／551W	606／606W	614／614W	632／632W
電源コード・プラグ	2.7m×1本 [Ⓐ]			
温度設定・表示	デジタル式			
庫内灯	—			
重量	約127kg	約150kg	約175kg	約195kg
付属品	アジャスター4個、スノコ2枚、排水バット1個	アジャスター4個、スノコ2枚、排水バット1個	アジャスター5個、スノコ2枚、排水バット1個	アジャスター5個、スノコ3枚、排水バット1個
錠前(シリンダー錠)	2ヶ所			3ヶ所

保冷库(冷蔵庫・ガラス扉)仕様

モデル	NDRG-490ECHC	NDRG-1080ECHC	NDRG-1390ECHC	NDRG-1690ECHC
冷却性能	+0℃~+10℃			
内容積	約490ℓ	約1090ℓ	約1386ℓ	約1681ℓ
外寸法 (mm)	W600×D800×H1905	W1200×D800×H1905	W1500×D800×H1905	W1800×D800×H1905
内寸法 (mm)	W498×D650×H1428	W1098×D650×H1428	W1398×D650×H1428	W1698×D650×H1428
外装	ステンレス鋼板(SUS430)・亜鉛引鋼板			
内装	塗装鋼板			
断熱材	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン			
扉	Low-E複層ガラス・2枚	Low-E複層ガラス・4枚	Low-E複層ガラス・6枚	
棚	PEコーティング網棚4枚	PEコーティング網棚8枚	PEコーティング網棚8枚	PEコーティング網棚12枚
棚耐荷重	65kg／枚	75kg／枚	95kg／枚	75kg／枚
圧縮機	320W(インバータ)	320W(インバータ)	400W(インバータ)	400W(インバータ)
冷却器／凝縮器	フィンチューブ／フィンチューブ			
冷媒 (量)	R-600a(約90g)	R-600a(約90g)	R-290(約95g)	R-290(約95g)
除霜方式	オフサイクルデフロスト			
電源 (50/60Hz)	AC100V 15A単独			3φ200V 15A単独
定格電流	2.3／2.3A	2.3／2.3A	3.7／3.7A	1.0／1.0A
定格消費電力	176／176W	176／176W	302／302W	302／302W
冷却時消費電力	200／200W	228／228W	360／360W	382／382W
霜取時消費電力	27／27W	55／55W	64／64W	87／87W
電源コード・プラグ	2.7m×1本 [Ⓐ]			2.7m×1本 [Ⓑ]
温度設定・表示	デジタル式			
庫内灯	LED13W×1灯	LED13W×1灯	LED13W×1灯	LED13W×2灯
重量	約98kg	約154kg	約195kg	約214kg
付属品	アジャスター4個、スノコ1枚、排水バット1個	アジャスター4個、スノコ2枚、排水バット1個	アジャスター5個、スノコ2枚、排水バット1個	アジャスター5個、スノコ3枚、排水バット1個
錠前(シリンダー錠)	なし(ガラス扉仕様のため取付不可能)			

保証について

製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、**保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。**

⚠ 安全に関するご注意

- このカタログに掲載の商品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
- 周囲温度が、30℃を超える環境で使用しますと故障の原因になります。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。

- アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。
- 防爆製品以外に保管しますと爆発する危険があります。
- 酸・アルカリ等の腐食性の強い物質は保管しないでください。
- 当製品は保冷用です。急速凍結目的でのご使用は避けてください。

発売元
日本フリーザー株式会社

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL. (03) 3831-7643 FAX. (03) 3832-0633
大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目15番31号 TEL. (06) 6337-0600 FAX. (06) 6369-2166
茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL. (029) 855-1181 FAX. (029) 855-0888
名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市中区西山本通2丁目2番地 TEL. (052) 788-7770 FAX. (052) 788-7771
神奈川営業所 〒251-0021 神奈川県横浜市磯区神郷2丁目12神明商事ビル3階 TEL. (0466) 29-0701 FAX. (0466) 29-0702
埼玉工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL. (048) 933-2755 FAX. (048) 936-2228

- 仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
- 梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
- カタログの記載内容は2026年9月現在のものです。

販売店



NIHON FREEZER
地球環境にやさしい




ノンフロン製品

フロン排出抑制法対象外

保冷库
-25℃~+10℃

インバーター制御による省エネタイプ
冷蔵、冷凍、冷凍冷蔵、サイズもいろいろ、
幅広い用途にお応えします

●電源プラグとコンセントの形状

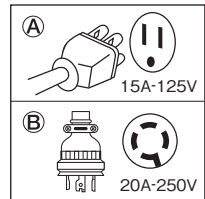

保証期間の延長(1年→5年)が
選択できるようになりました。
総合カタログP3参照。

URL : <https://www.nihon-freezer.co.jp>



日本フリーザー株式会社

メディカルからバイオまで、広範囲の分野で利用できます。
 腐食、汚れに強いステンレス外装。


ノンフロン冷媒を採用 (NDR/NDF/NDRシリーズ)

環境にやさしいノンフロン冷媒を採用。これに伴い「フロン排出抑制法」の対象外製品となることから、機器の修理時・廃棄時におけるフロン類の回収・破壊、簡易点検等の実施、修理履歴の保存等、様々な管理義務が発生しません。

インバータ制御による省エネタイプ

トリプルインバータ制御方式 (圧縮機、庫内ファン、凝縮ファン) を採用。状況に応じた効率の良い運転で、省エネ・省コスト効果を発揮します。

■ムダな電力消費を抑えるインバータ制御

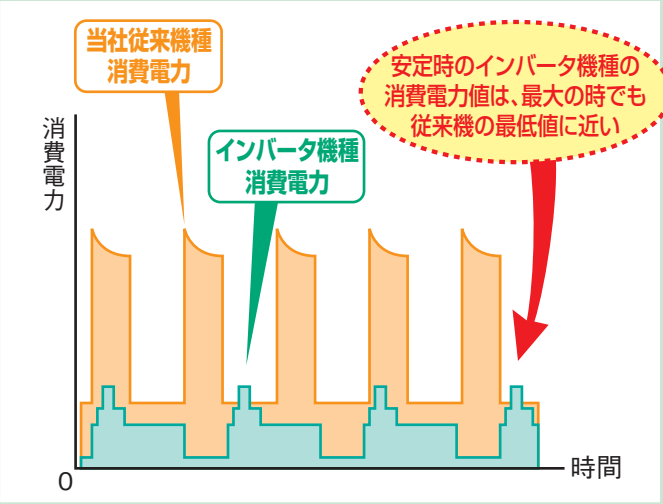

オートクローズ方式扉

扉の閉め忘れをなくす安心のオートクローズ扉。庫内温度の上昇を防ぎます。



シリンダー錠標準装備

保存物の管理に便利な鍵つきです。上下2枚の扉を1個の鍵で施錠します。

※NDRGシリーズ (ガラス扉) は除く。



マイコン制御&デジタル表示

温度制御は、保存物にあわせて1℃単位の温度設定が出来るマイコン制御方式を採用。目詰まりをお知らせするフィルター警報ランプや強制霜取スイッチを採用するなど機能性も充実。また、停電の場合も温度設定などは記録されていますので、自動的に復帰します。




本体一体発泡構造 (ノンフロン断熱)

中仕切を含む本体一体発泡構造により、強度と断熱性が向上。環境に優しいノンフロン断熱材 (シクロペンタン) を採用。



省エネタイプのLow-Eガラス扉 (NDRGシリーズ)

断熱性、透明性に優れたLow-Eガラスを採用。結露を防止し、高い省エネ性を発揮します。

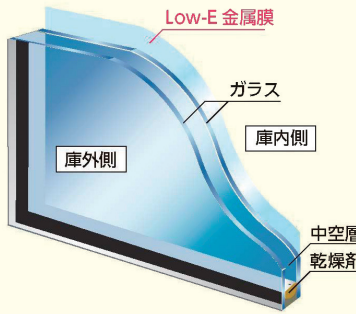


フロントパネルがスイングアップ

スイングアップ方式の採用で、点検及びメンテナンスが簡単に行えます。



エアフィルター

コンデンサーをホコリから守るエアフィルターは、手軽に取り外せるので洗浄もラクラク。※機械の正常運転のため、月に2度程度洗浄してください。

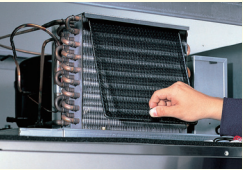

保冷库 (冷蔵庫)仕様

モデル	NDR-480ECHC	NDR-630ECHC	NDR-780ECHC	NDR-1080ECHC	NDR-1380ECHC	NDR-1670ECHC
冷却性能	-7℃～+12℃					
内容積	約485ℓ	約639ℓ	約783ℓ	約1085ℓ	約1388ℓ	約1684ℓ
外寸法 (mm)	W600×D800×H1905	W750×D800×H1905	W900×D800×H1905	W1200×D800×H1905	W1500×D800×H1905	W1800×D800×H1905
内寸法 (mm)	W498×D650×H1428	W648×D650×H1428	W798×D650×H1428	W1098×D650×H1428	W1398×D650×H1428	W1698×D650×H1428
外装	ステンレス鋼板 (SUS430)・垂鉛引鋼板					
内装	ステンレス鋼板 (SUS430)					
断熱材	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン					
扉	ステンレス鋼板 (SUS430)・2枚		ステンレス鋼板 (SUS430)・4枚		ステンレス鋼板 (SUS430)・6枚	
棚	PEコーティング網棚3枚	PEコーティング網棚3枚	PEコーティング網棚6枚	PEコーティング網棚6枚	PEコーティング網棚6枚	PEコーティング網棚9枚
棚耐荷重	65kg/枚	65kg/枚	55kg/枚	75kg/枚	95kg/枚	75kg/枚
圧縮機	320W (インバータ)	320W (インバータ)	320W (インバータ)	320W (インバータ)	400W (インバータ)	400W (インバータ)
冷却器/凝縮器	フィンチューブ/フィンチューブ					
冷媒 (量)	R-600a (HCノンフロン) 90g	R-600a (HCノンフロン) 90g	R-600a (HCノンフロン) 90g	R-600a (HCノンフロン) 90g	R-290 (HCノンフロン) 95g	R-290 (HCノンフロン) 95g
除霜方式	ヒーターデフロスト					
電源 (50/60Hz)	AC100V 15A単独					
定格電流	1.9/1.9A	1.9/1.9A	1.9/1.9A	1.9/1.9A	3.4/3.4A	3.4/3.4A
定格消費電力	139/139W	139/139W	139/139W	139/139W	264/264W	264/264W
冷却時消費電力	181/181W	188/188W	228/228W	232/232W	322/322W	345/345W
霜取時消費電力	292/292W	299/299W	339/339W	343/343W	308/308W	331/331W
電源コード・プラグ	2.7m×1本 [Ⓐ]					
温度設定・表示	デジタル式					
庫内灯	—					
重量	約84kg	約93kg	約106kg	約123kg	約150kg	約171kg
付属品	アジャスター4個、スノコ1枚、排水バット1個	アジャスター4個、スノコ1枚、排水バット1個	アジャスター4個、スノコ2枚、排水バット1個	アジャスター4個、スノコ2枚、排水バット1個	アジャスター5個、スノコ2枚、排水バット1個	アジャスター5個、スノコ3枚、排水バット1個
錠前 (シリンダー錠)	1ヶ所		2ヶ所		3ヶ所	

保冷库 (冷凍庫)仕様

モデル	NDF-480ECHC	NDF-630ECHC	NDF-780ECHC	NDF-1070ECHC	NDF-1360ECHC	NDF-1660ECHC
冷却性能	-8℃～-25℃					
内容積	約485ℓ	約639ℓ	約783ℓ	約1074ℓ	約1377ℓ	約1673ℓ
外寸法 (mm)	W600×D800×H1905	W750×D800×H1905	W900×D800×H1905	W1200×D800×H1905	W1500×D800×H1905	W1800×D800×H1905
内寸法 (mm)	W498×D650×H1428	W648×D650×H1428	W798×D650×H1428	W1098×D650×H1428	W1398×D650×H1428	W1698×D650×H1428
外装	ステンレス鋼板 (SUS430)・垂鉛引鋼板					
内装	ステンレス鋼板 (SUS430)					
断熱材	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン					
扉	ステンレス鋼板 (SUS430)・2枚		ステンレス鋼板 (SUS430)・4枚			ステンレス鋼板 (SUS430)・6枚
棚	PEコーティング網棚3枚	PEコーティング網棚3枚	PEコーティング網棚6枚	PEコーティング網棚6枚	PEコーティング網棚6枚	PEコーティング網棚9枚
棚耐荷重	65kg/枚	65kg/枚	55kg/枚	75kg/枚	95kg/枚	75kg/枚
圧縮機	400W (インバータ)	400W (インバータ)	400W (インバータ)	400W (インバータ)	400W (インバータ)	400W (インバータ)+300W (一定速)
冷却器／凝縮器	フィンチューブ／フィンチューブ					
冷媒 (量)	R-290 (HCノンフロン) 100g	R-290 (HCノンフロン) 100g	R-290 (HCノンフロン) 100g	R-290 (HCノンフロン) 140g	R-290 (HCノンフロン) 140g	R-290 (HCノンフロン) 145g +R-290 (HCノンフロン) 85g
除霜方式	ヒーターデフロスト					
電源 (50/60Hz)	AC100V 15A単独				3φ200V 15A単独	
定格電流	2.7/2.7A	2.7/2.7A	3.0/3.0A	3.5/3.5A	1.1/1.1A	1.6/1.5A
定格消費電力	207/207W	220/220W	233/233W	267/267W	294/294W	438/447W
冷却時消費電力	249/249W	269/269W	322/322W	360/360W	399/399W	580/589W
霜取時消費電力	328/328W	335/335W	374/374W	599/599W	612/612W	649/649W
電源コード・プラグ	2.7m×1本 [Ⓐ]				2.7m×1本 [Ⓑ]	
温度設定・表示	デジタル式					
庫内灯	—					
重量	約87kg	約96kg	約109kg	約129kg	約152kg	約191kg
付属品	アジャスター4個、 スノコ1枚、排水バット1個	アジャスター4個、 スノコ1枚、排水バット1個	アジャスター4個、 スノコ2枚、排水バット1個	アジャスター4個、 スノコ2枚、排水バット1個	アジャスター5個、 スノコ2枚、排水バット1個	アジャスター5個、 スノコ3枚、排水バット1個
錠前 (シリンダー錠)	1ヶ所		2ヶ所			3ヶ所

■オプション

●温度記録計 (SR10006)

- ①6打点式 (6色ワイヤドット)
- ②外形寸法: W144×H144×D220mm、質量: 2.5kg
- ③センサー: 白金測温抵抗体Pt-100Ω
- ④記録紙送り速度: 10～1500mm/h (28段階)
- ⑤有効記録幅: 100mm、記録紙長: 16m (折りたたみ式)
- ⑥電源電圧: 100～240VAC (周波数切替不要)

価格: ¥250,000 (記録紙1箱付) 記録紙: ¥20,000 (6箱1組)

注1: 取付工賃が別途発生します。注2: 上記価格にはセンサー1本分が含まれています。追加分についてはお問い合わせください。



●排水自動蒸発ユニット<床置タイプ>

霜取排水を蒸発皿に受け、強制的に蒸発させるユニット。
 ・型式: JUL100V
 ・外寸法: W360×D560×H95mm
 ・貯水量: 約5.5ℓ
 ・重量: 7.5kg
 ・ヒーター容量: 1φ・130W
 ・電源: AC100V 50/60Hz
 価格: ¥61,000



●アクセスポート


サイズφ13, 40, 50mmから選択可能。加工位置、別途打合せ。
 価格: ¥19,000/箇所

●遮光フィルム

対象モデル: NDRG (ガラス扉)
 価格: ¥39,000

●キャスター仕様





製品を移動する際に便利です。
 価格: ¥37,000

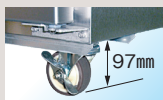

豊富なラインナップ!

【冷蔵、冷凍、冷凍冷蔵、ガラス扉、製品ワイド600mm～1800mm】

概略寸法図(代表モデル)

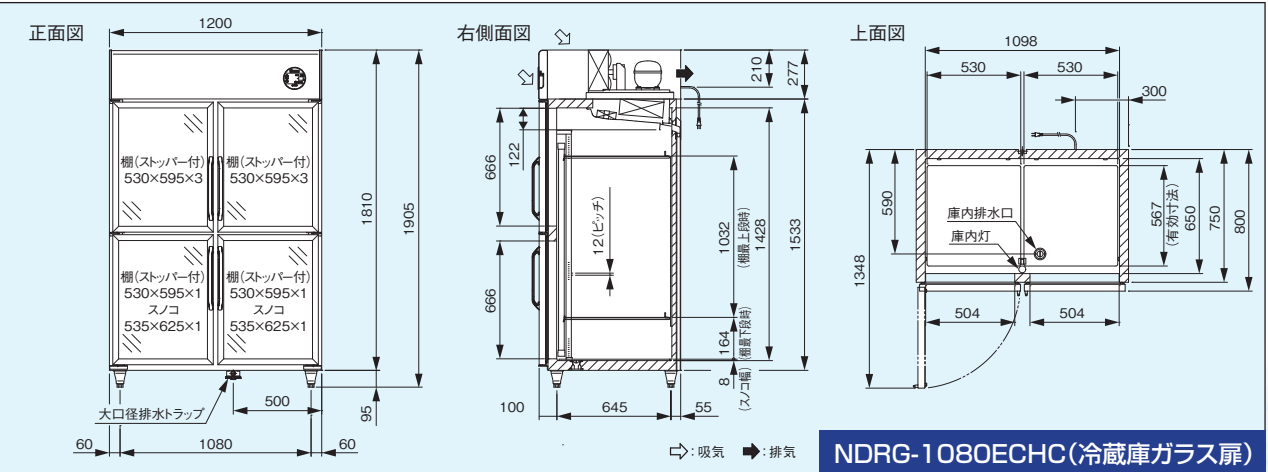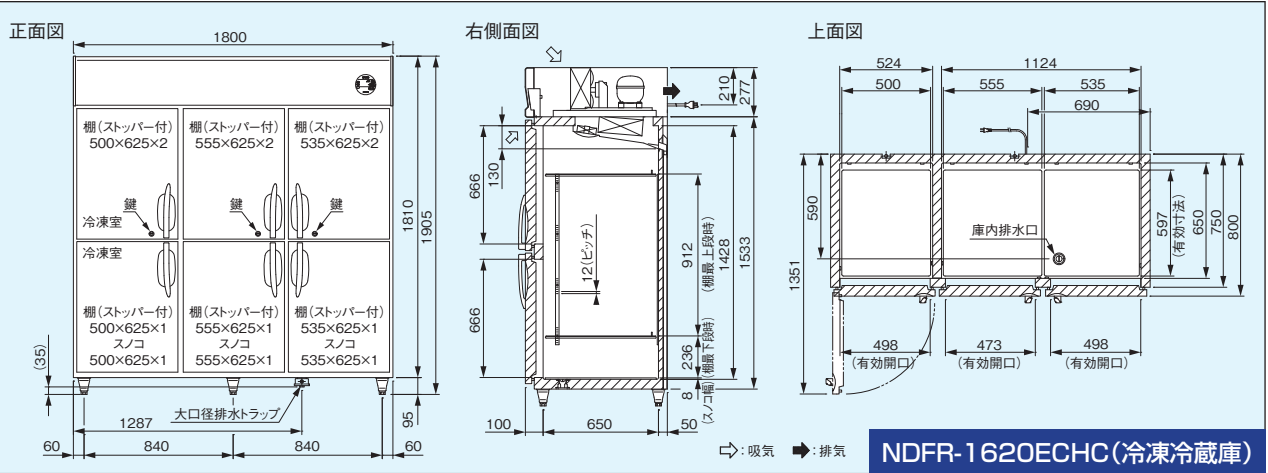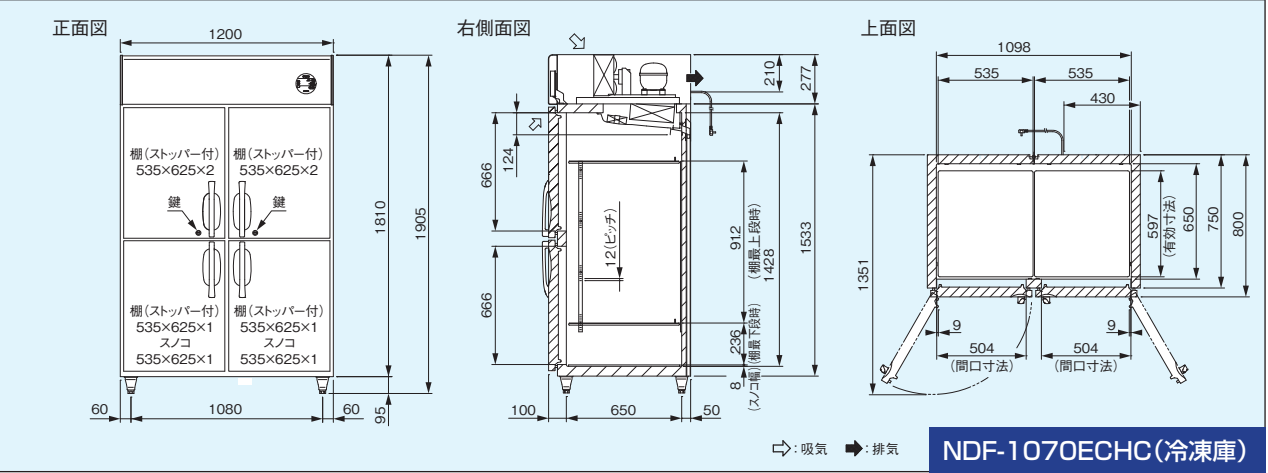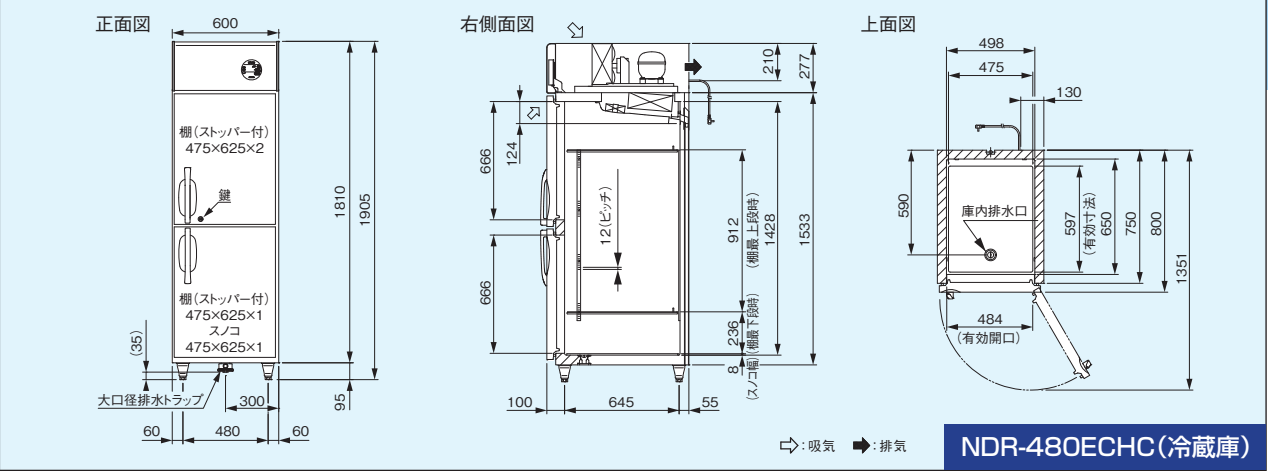

2枚扉(W600mm/W750mm)



NDR/NDF/NDFRシリーズ NDRGシリーズ

4枚扉(W900mm/W1200mm/W1500mm)



NDR/NDF/NDFRシリーズ NDRGシリーズ

6枚扉(W1800mm)



NDR/NDF/NDFRシリーズ NDRGシリーズ

※冷凍冷蔵庫(NDFR)における冷凍室は、
・2枚扉:上室
・4枚扉:左側の上下2室
・6枚扉:左側の上下2室

◆保冷库ラインナップ

扉枚数		2枚		4枚			6枚
製品	幅	W600mm	W750mm	W900mm	W1200mm	W1500mm	W1800mm
冷蔵庫【NDR】 -7℃～+12℃	モデル	NDR-480EHC	NDR-630EHC	NDR-780EHC	NDR-1080EHC	NDR-1380EHC	NDR-1670EHC
	内容積	約485ℓ	約639ℓ	約783ℓ	約1085ℓ	約1388ℓ	約1684ℓ
	電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
	標準価格	¥850,000	¥950,000	¥1,060,000	¥1,130,000	¥1,260,000	¥1,390,000
冷凍庫【NDF】 -8℃～-25℃	モデル	NDF-480EHC	NDF-630EHC	NDF-780EHC	NDF-1070EHC	NDF-1360EHC	NDF-1660EHC
	内容積	約485ℓ	約639ℓ	約783ℓ	約1074ℓ	約1377ℓ	約1673ℓ
	電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	3φ200V	3φ200V
	標準価格	¥930,000	¥1,060,000	¥1,230,000	¥1,360,000	¥1,490,000	¥1,650,000
冷凍・冷蔵庫【NDFR】 F:-8℃～-25℃ R:-7℃～+12℃	モデル	NDRG-490EHC		NDFR-700EHC	NDFR-1020EHC	NDFR-1320EHC	NDFR-1620EHC
	内容積			F:約354ℓ R:約354ℓ	F:約510ℓ R:約510ℓ	F:約664ℓ R:約664ℓ	F:約510ℓ R:約1111ℓ
	電源			AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
	標準価格			¥1,380,000	¥1,410,000	¥1,500,000	¥1,710,000
冷蔵庫(ガラス扉)【NDRG】 +0℃～+10℃	モデル	NDRG-490EHC				NDRG-1080EHC	NDRG-1390EHC
	内容積					約1090ℓ	約1386ℓ
	電源					AC100V	AC100V
	標準価格					¥1,250,000	¥1,450,000
						NDRG-1690EHC	NDRG-1690EHC
						約1681ℓ	約1681ℓ
						3φ200V	3φ200V
						¥1,570,000	¥1,570,000

※2026年9月から価格が変更になりました。