

**NEW!!**

# 薬用冷凍冷蔵庫

ノンフロン製品  
フロン排出抑制法対象外



## 一台二役(冷凍・冷蔵保存)、 設置場所を取らないスリムタイプ

### ■特徴■

- ①地球環境にやさしいノンフロン冷媒を採用。フロン排出抑制法の対象外製品となるため、冷媒回収や簡易点検等の煩わしい管理義務が発生しません。
- ②設置場所を取らないスリムタイプ(製品幅50cm)。
- ③冷蔵室と冷凍室で、それぞれ独立した冷却回路・制御回路を持ち、圧縮機も2台搭載。各室の影響を受けないような設計。
- ④冷凍室は、壁面から直接冷却する無風冷却方式のため、自動霜取りによる庫内の温度上昇がありません。
- ⑤豊富な警報を標準装備(高温・低温警報、ドア警報、外部警報出力)。



冷蔵(上室)	冷凍(下室)
+2℃～+14℃	-20℃～-30℃
約179ℓ	約85ℓ




モデル: **NC-ME25S1HC**

価格 **¥520,000** (税別)

- 外寸法: W500×D(650+85)×H1900mm
- 電源: 100V 50/60Hz

### 寸法図

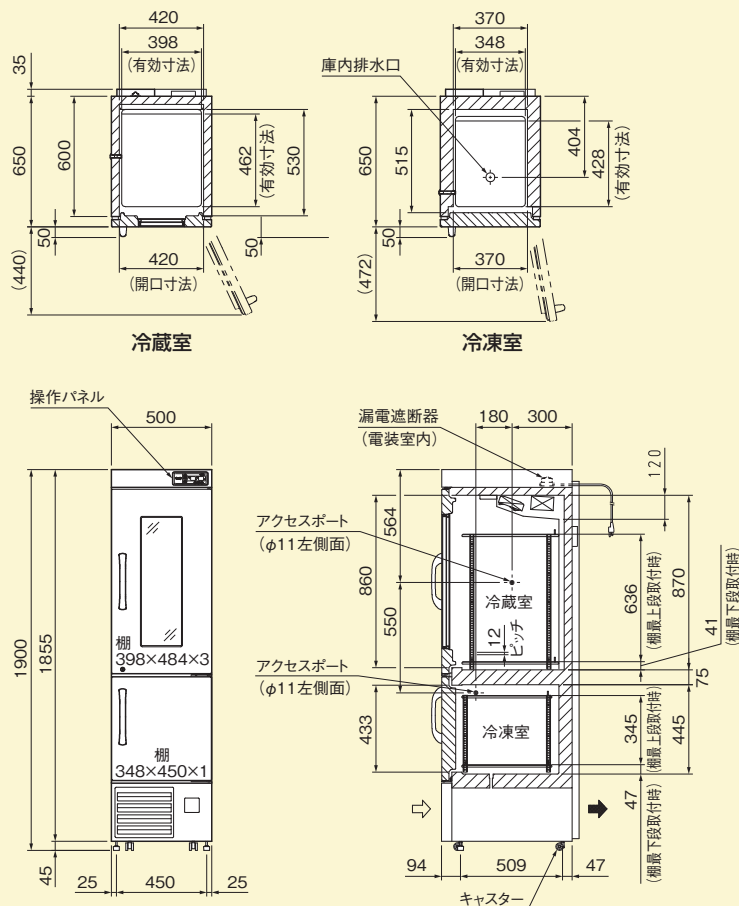

(単位:mm)



**日本フリーザー株式会社**

URL : <https://www.nihon-freezer.co.jp>

薬用冷凍冷蔵庫

モデル	NC-ME25S1HC	
種別	冷蔵室(上室)	冷凍室(下室)
冷却性能	+2℃～+14℃	-20℃～-30℃
内容積	約179ℓ	約85ℓ
外寸法(mm)	W500×D(650+85)×H1900	
内寸法(mm)	W420×D530×H870	W370×D515×H445
外装／内装	塗装鋼板・亜鉛引鋼板／塗装鋼板	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
扉	塗装鋼板 複層ガラス(Low-E)窓付き	塗装鋼板
棚	ポリエチレンコーティング網棚:3枚	ポリエチレンコーティング網棚:1枚
棚耐荷重	20kg	20kg
圧縮機定格出力	160W(一定速)	170W(一定速)
冷却器	フィンチューブ(冷気循環)	パイプオンシート(壁面冷却)
凝縮器	フィンチューブ(フィルターあり)	
冷媒	R-600a(HCノンフロン)35g	R-290(HCノンフロン)50g
除霜方式	オフサイクル式 (6時間に1回圧縮機停止)	電源OFFで自然解凍
除霜水処理方式	自動蒸発式	—
電源	AC100V 50/60Hz 15A単独	
運転電流	3.0／2.5 A	
定格消費電力	219／234 W	
放熱量	790／850 kJ/h	
温度設定／表示	デジタル設定／デジタル表示	
高温低温警報	ブザー・ランプ・ディスプレイ報知(設定温度に対する偏差式)	
ドア警報	ブザー・ランプ・ディスプレイ報知(扉開放30秒後)	
外部警報出力	無電圧接点出力3P端子(定格負荷 AC250V5A, DC30V5A)	
漏電遮断器	定格電流30A 高速型	
庫内灯	LED(2W,315lm)	—
アクセスポート	左側面1ヶ所(φ11mm)	左側面1ヶ所(φ11mm)
重量	約100kg	
キャスター／アジャスター	4個／2個(前)	
付属品	鍵2本(内1本予備、1ヶ所で冷蔵室・冷凍室を同時に施錠)、転倒防止金具	

- (注) 1.上記仕様の冷却性能は、周囲温度+5℃～+30℃、無負荷時のものです。  
2.運転電流、消費電力は、周囲温度+30℃、庫内灯OFF、連続運転・無負荷・安定時の値です。  
3.電源コード・プラグは、下図を参照してください。  
4.本仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。

オプション

●温度ロガー(KTシリーズ)

薬用冷凍冷蔵庫の庫内に、  
ロガーごと設置が可能!



- ①本体内蔵のセンサーによって温度を検知・記録。  
ロガーごと庫内に設置が可能。
- ②記録データは、付属のソフト(対応OS:Windows7以上)と  
NFC通信でPCへ取り込み、グラフ表示、レポート作成等が可能。
- ③記録間隔:1～255分間隔、記録容量:16,000件
- ④温度ロガーサイズ:H34×W90×D15mm
- ⑤電池寿命は約3年。

ロガー本体	型番:KT-155F 価格:¥10,800
測定温度範囲	-40℃～+80℃
取付用アタッチメント	型番:AT-150S, 価格:¥1,500
NFC通信読取りリーダー	型番:RC-S380S, 価格:¥5,300
合計標準価格	¥17,600(上記3点セット)

●自記温度記録計

- ①1ペン式連続自動記録
- ②サイズ:W149×D103×H174mm
- ③センサー:ガス膨張式
- ④電源:DC1.5V(単2乾電池1本)
- ⑤記録用紙:感圧紙、インキ不要。  
(初回、12冊1年分付き)
- ⑥上下限警報用接点内蔵(要AC電源)



型式:AKM-4014:本体価格¥96,000  
(記録範囲:-40℃～+14℃)

型式:AKM-0620:本体価格¥96,000  
(記録範囲:6℃～+20℃)

記録紙価格¥8,400(12冊1年分)

※製品下方の機械室内に設置  
となります。製品本体と同時  
発注時に限り取付工賃含む。  
冷蔵室、冷凍室どちらかの取  
付となります。

●麻薬金庫(冷蔵室用)

冷蔵室の庫内底面への  
設置となります。  
製品本体と同時発注時  
に限り取付工賃含む。



型式	寸法(mm)	重量(kg)	価格
DS-S	外寸法: W255×D150×H215 内寸法: W193×D116×H152	3.0	¥29,000

●遮光板  
(冷蔵室用)

型式:  
E05696C01  
価格  
¥30,000



保証について

製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、  
保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
- 周囲温度が、+5℃～+30℃以外の環境で使用しますと故障の原因になります。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
- アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。  
防爆製品以外に保管しますと爆発する危険があります。
- 当製品は保冷用です。急速凍結目的でのご使用は避けてください。

発売元  
**日本フリーザー株式会社**

販売店

本 社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL.(03)3831-7643 FAX.(03)3832-0633  
大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目15番31号 TEL.(06)6337-0600 FAX.(06)6369-2166  
茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL.(029)855-1181 FAX.(029)855-0888  
名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市中区西山本通2丁目2番地 TEL.(052)788-7770 FAX.(052)788-7771  
神奈川営業所 〒251-0021 神奈川県横浜市鶴沼神明2丁目1・2神明商事ビル3階 TEL.(0466)29-0701 FAX.(0466)29-0702  
埼玉工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL.(048)933-2755 FAX.(048)936-2228

- 仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
- 梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
- カタログの記載内容は2026年2月現在のものです。